

BEAUTY
TAKES
SHAPE



Tel: 55 5659 7100
WhatsApp: 55 3459 6988
Mail: info@suplidor.com.mx

body) tim[®]
by Imperium[®]

body

Stimulating
Treatment of
Inner
Muscles

REDEFINIMOS LA DIATERMOCONTRACCIÓN®


Reinventamos IMPERIUM®.

Nos desafiamos a nosotros mismos a ser diferentes.

Nuestro objetivo era cambiar el status quo de las máquinas de tratamientos corporales.

body stim
Imperium

El método Diatermocontraction® fue creado por primera vez en el año 2004, tras años de investigación y estudio en el campo de la estética y la medicina, haciendo uso de las tecnologías más avanzadas y la electrónica más moderna.

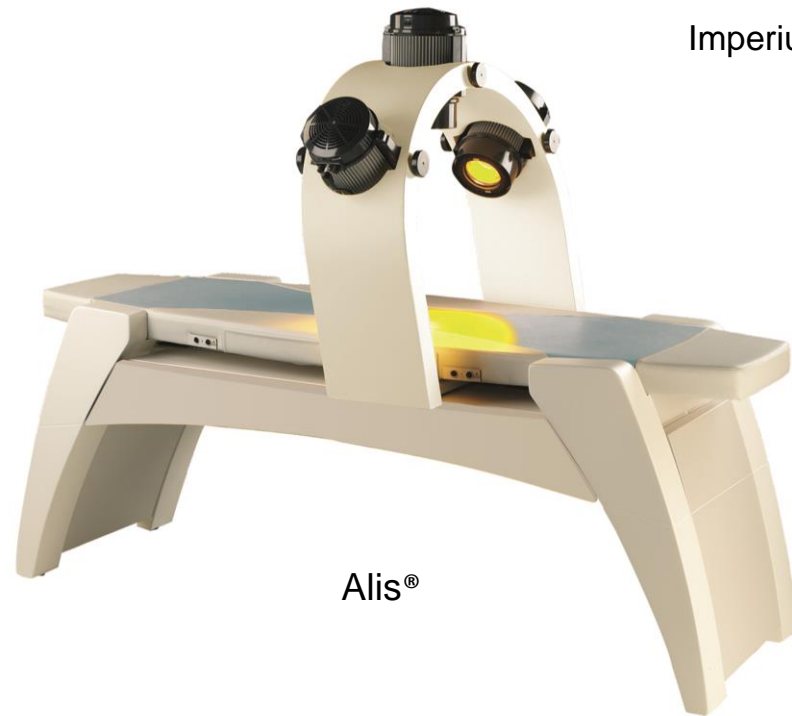

Imperium® Med 400



diatermo
contrazione



Bodystim by Imperium®

BIENVENIDO



HEMOS LLEGADO A PERFICIAR aún más ESTE MÉTODO con la última versión producida, en la que todas las características propuestas anteriormente se han llevado al más alto nivel tecnológico.

bodystim
by Imperium®

ESTADO DEL ARTE




En los últimos años, la estimulación neuromuscular no invasiva ha sido un foco cada vez mayor en diversos campos como la rehabilitación, el fortalecimiento y los tratamientos estéticos.

Las tecnologías convencionales EMS y HIFEM aplican corrientes al cuerpo humano o directamente a través de electrodos desechables o con sondas, pero ambas con límites importantes. Una de todas las dificultades para lograr el máximo reclutamiento y áreas musculares.

ESTADO DEL ARTE

Un EMS convencional reproduce un patrón de corriente basado en la forma de onda del potencial de acción para activar las unidades motoras que controlan las fibras musculares.


El límite de este EMS convencional está representado por señales de baja frecuencia, que no son capaces de llegar a los tejidos más profundos.

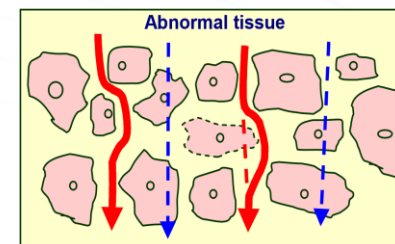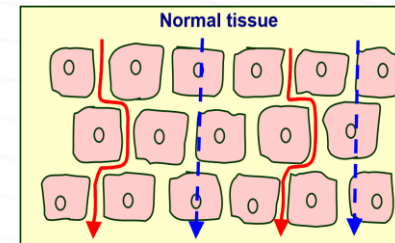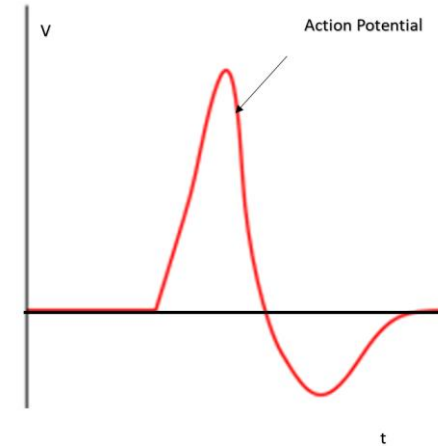

— Low frequencies, primarily reflect the extracellular environment
--- High frequencies, reflect both the intra- and extracellular environment

ESTADO DEL ARTE


Para superar los límites de las tecnologías disponibles, Brera Medical diseñó un pulso de contracción que reproduce la forma de onda del potencial de acción utilizando una portadora de alta frecuencia (RF). Gracias a ello hemos podido llegar a tejidos profundos sorteando la barrera de la primera capa de piel.

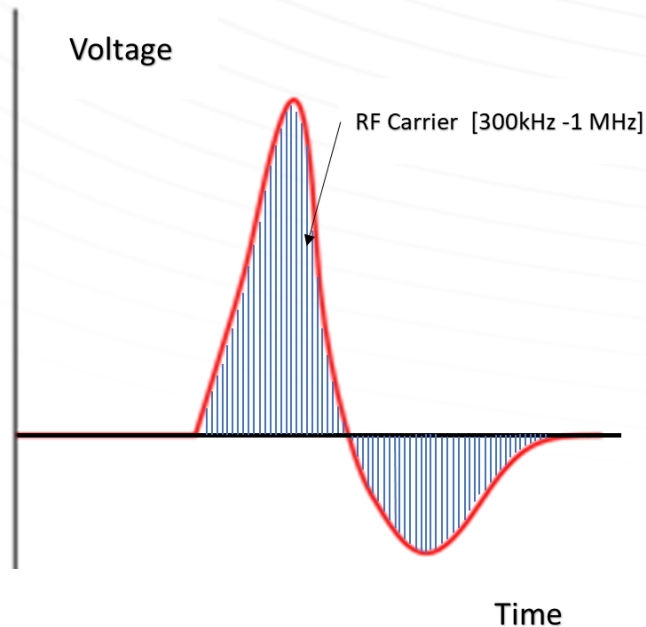

Diatermocontraction® pulse generated by Brera Medical devices.

DIATERMOCONTRACTION® TECHNOLOGY


El pulso es controlado en amplitud y duración por la unidad de control con las siguientes características:

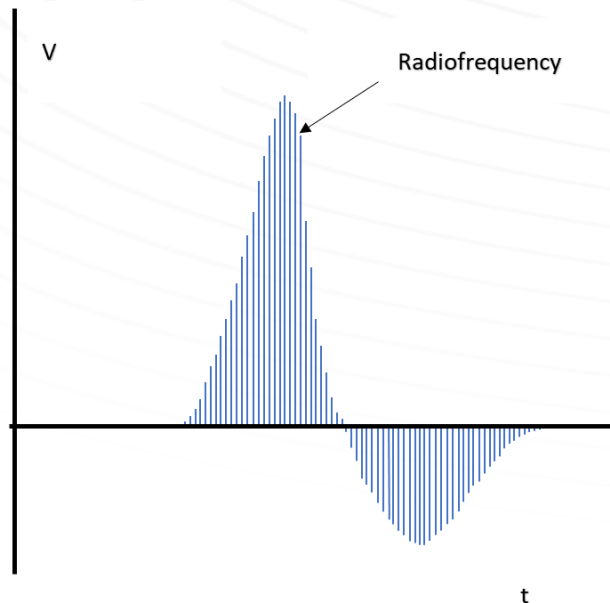

- Valor medio igual a cero
- Onda asimétrica bifásica equilibrada
- Duración del pulso ajustable en el rango 20- 400 μ s.
- Tasa de repetición de pulsos ajustable en el rango 0,1 Hz - 500 Hz
- Frecuencia portadora ajustable en el rango 300 kHz – 1 MHz
- Efecto diatérmico controlado por la amplitud de la señal.

DIATERMOCONTRACTION® TECHNOLOGY

Como consecuencia, la contracción muscular se puede sincronizar con una fase diatérmica generando la señal única y patentada de Brera Medical llamada **Diatermocontracción®**.

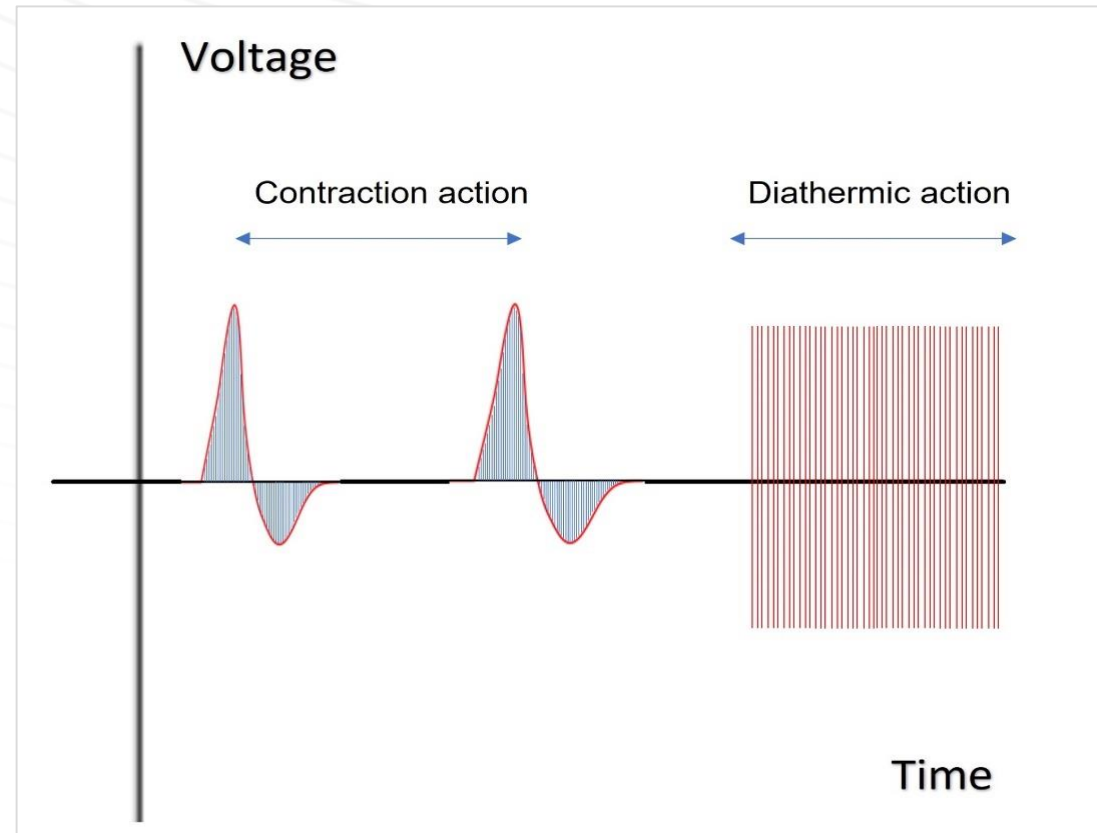

POR QUÉ BODYSTIM ES ÚNICO

El RF Diatermocontraction® Pulse, gracias a sus características bioreconocidas, produce un reclutamiento total de fibras, preservando un confort excepcional durante la sesión de tratamiento.

Las contracciones musculares se pueden combinar con la acción térmica producida por la señal Diatermocontraction® para promover la reafirmación, la tonificación y la tonificación.

bodystim
by Imperium®

UN ENTRENAMIENTO CORPORAL INTENSO QUE AYUDA A
TENSAR LA PIEL, TONIFICAR Y FORTALECER LOS MÚSCULOS.

NEOELASTOGENESIS AND NEOCOLLAGENESIS

SKIN TEXTURE IMPROVEMENT

CELLULITE TREATMENT

INCREASE MUSCLE TROPHISM

ENHANCEMENT OF ATP PRODUCTION

STIMULATION OF LOCAL METABOLISM

OXYGENATION AND FIRING OF TISSUES

body}tim
by Imperium®

Bodystim viene con:

- Dos almohadillas de silicona reutilizables de gran tamaño para grandes superficies.
- Dos almohadillas de silicona reutilizables de tamaño pequeño para áreas más pequeñas.
- Un carrito premiado, elegante y funcional.
- Una silla de cuero personalizada para organizar todos los accesorios en un solo lugar.



Alto nivel de funcionalidades

- Dos canales configurables independientes.
- Cuatro conectores de pieza de mano.
- Sensores para controlar el aumento térmico en la piel.
- Indicación de colocación de electrodos para cada zona de tratamiento.
- Pantalla táctil moderna.
- Software fácil de usar.
- Tratamiento simultáneo de dos zonas con diferentes ambientaciones.
- Tratamiento simultáneo de dos pacientes con entornos diferentes.



Características extras



Refuerzo de diatermia durante la sesión.





Sesión de tonificación (sin ciclos)
Estimulación muscular intensiva




Polaridad dinámica para máxima contracción y acción más profunda



ÁREAS OBJETIVO

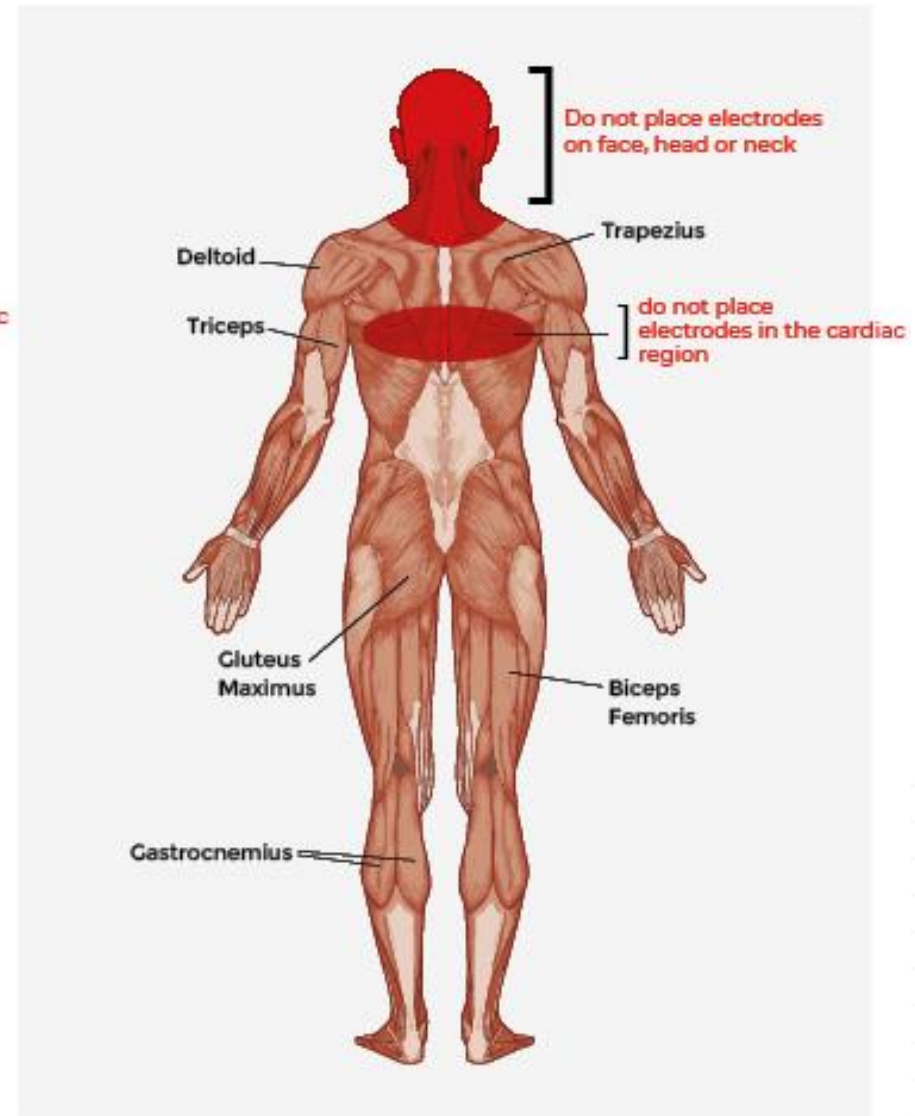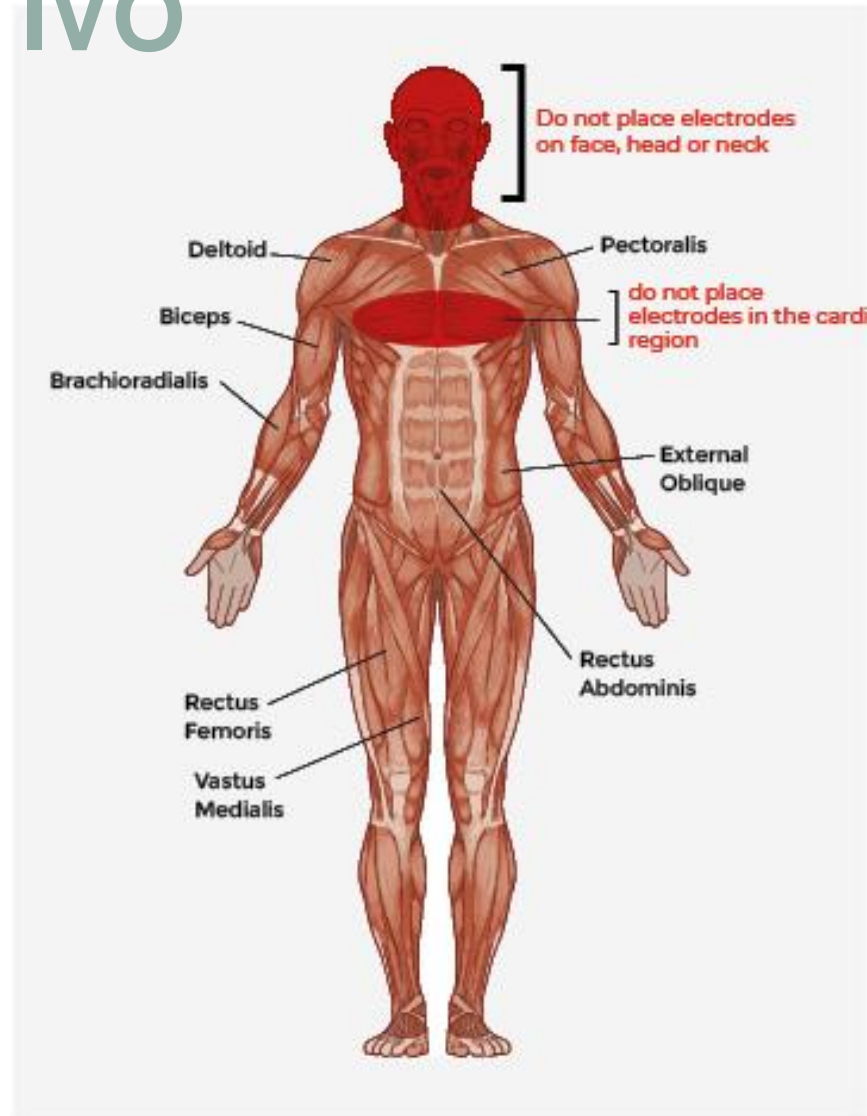

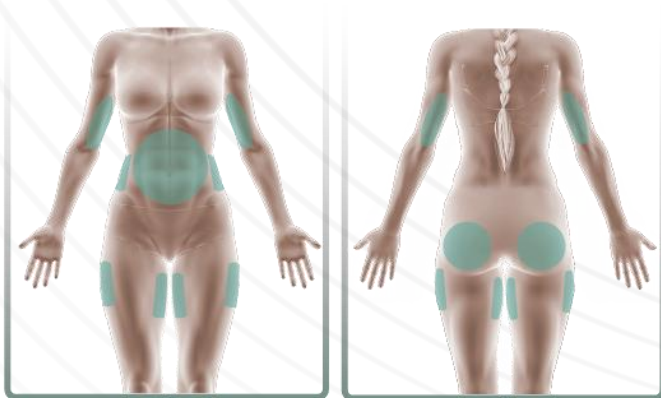

TECNOLOGÍAS RENOVADAS PARA RESULTADOS AÚN MÁS SORPRENDENTES

thermosculpt™

Static treatment



Dos almohadillas de diferentes tamaños diseñadas para adaptarse a distintas zonas del cuerpo. Proporcionan Diatermocontracción® y permiten que el tratamiento sea controlado automáticamente por Imperium® Bodystim.

biQuad+

Dynamic treatment



Pieza de mano RF multipolar para tratamientos corporales con 4 electrodos que emiten RF Diatermocontracción® equipado con un sensor térmico.

Gracias a su diseño permite un tratamiento cómodo que ayuda a esculpir y redefinir el cuerpo en zonas más amplias.

TRES NUEVOS DIATERMOCONTRACTION® MÉTODOS DE TRATAMIENTO



thermosculpt™




biQuad+



hybrid


thermosculpt[®]

- 4 electrodos simultáneamente, 2 tamaños (hasta 16 electrodos de radio)
- 3 ciclos durante el tratamiento (Calentamiento, Intensivo, Enfriamiento)
- 2 canales independientes
- 7 protocolos preestablecidos
- Sensor térmico en cada pad para controlar el aumento de temperatura.

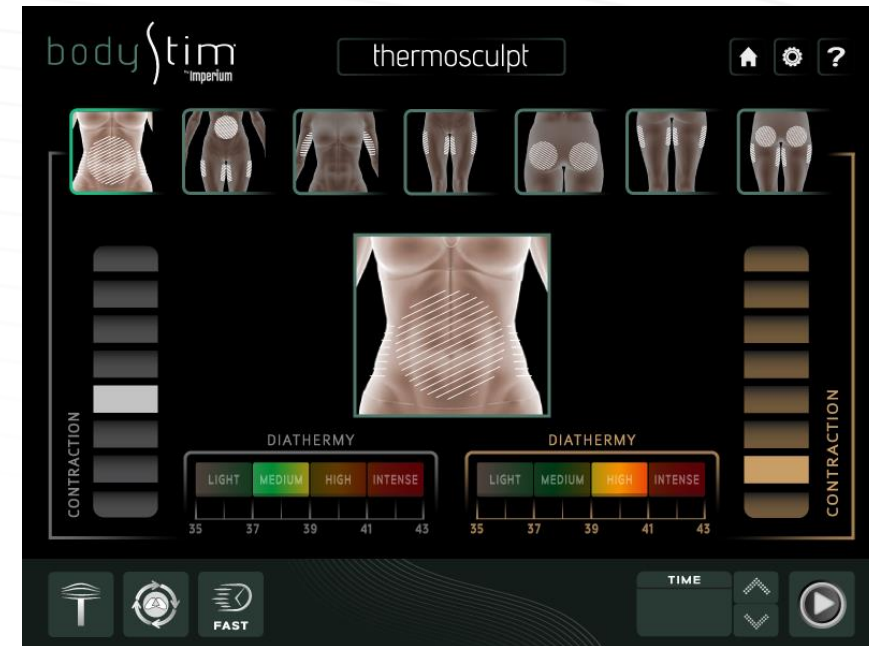


biQuad+

- 2 sondas simultáneamente para obtener resultados máximos
- 2 canales independientes para tratar diferentes áreas o diferentes pacientes
- Contracciones musculares y calentamiento simultáneamente.
- Tiempo de tratamiento reducido en áreas grandes.
- Sensor térmico para controlar el aumento de temperatura.

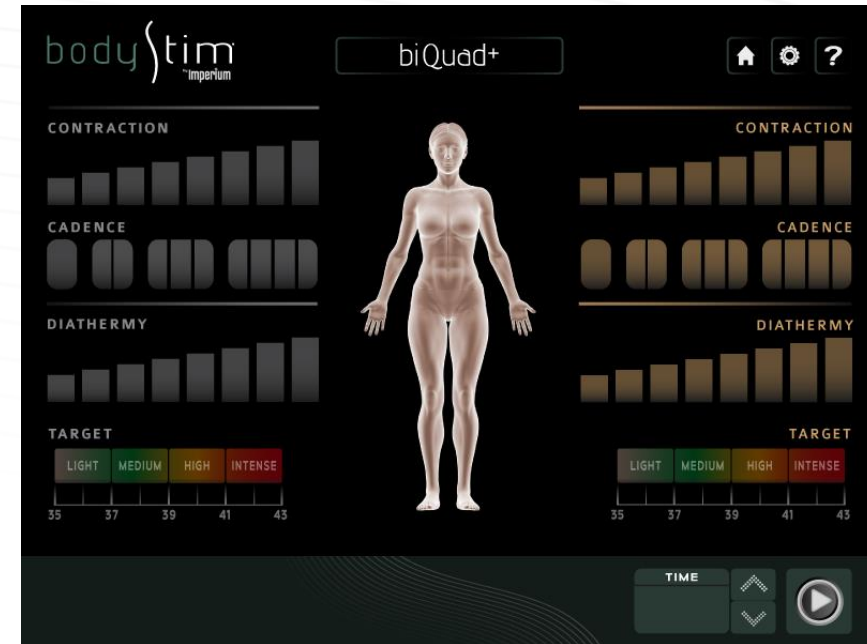

hybrid

Integra simultáneamente los efectos de Thermosculpt™ y biQuad+™ permitiendo el tratamiento de diferentes áreas del cuerpo con resultados personalizados según las necesidades del cliente.

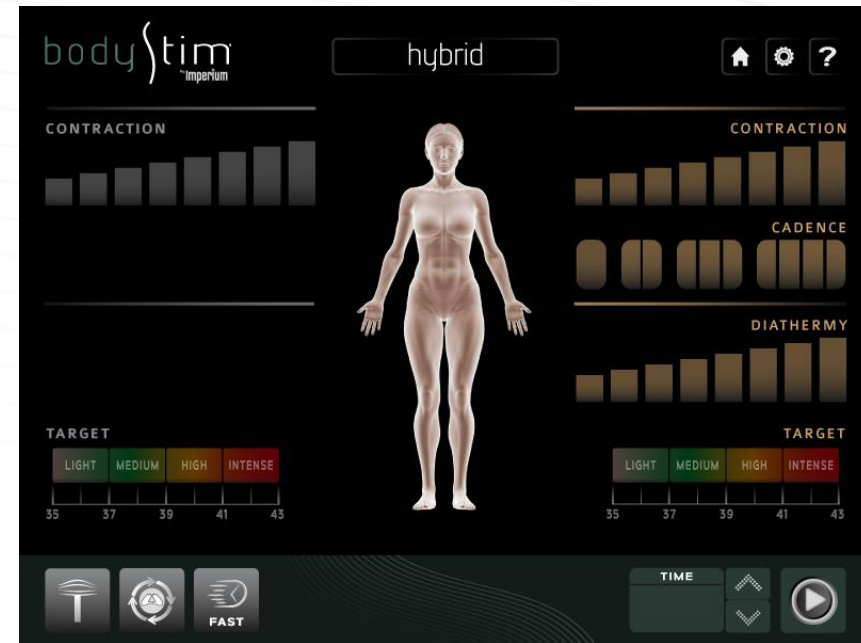

RESULTADOS INMEDIATOS DESDE EL PRIMER TRATAMIENTO



Después de seis sesiones de tratamiento de 30 min.

RESULTADOS INMEDIATOS DESDE EL PRIMER TRATAMIENTO



Después de seis sesiones de tratamiento de 30 min.

RESULTADOS INMEDIATOS DESDE EL PRIMER TRATAMIENTO



Después de ocho sesiones de tratamiento de 30 min.

RESULTADOS INMEDIATOS DESDE EL PRIMER TRATAMIENTO



Después de seis sesiones de tratamiento de 30 min.

RESULTADOS INMEDIATOS DESDE EL PRIMER TRATAMIENTO



Después de seis sesiones de tratamiento de 30 min.

CE Marcada como dispositivo no médico



MARKETING

KIT

- Enrollar
- Póster
- dócil
- Antes después
- Video promocional
- Galería de fotos

Próximamente
una nueva zona
DMK reservada
como la de
Jovena



PUNTOS PARA VENTA DEL DISPOSITIVO

SISTEMA MULTIAPLICACIONES PARA LA RESTAURACIÓN TOTAL DEL CUERPO

DISEÑO PREMIADO INTERNACIONALMENTE

DIATERMOCONTRACCIÓN® PATENTADA

CUATRO CONECTORES DE PIEZA DE MANO

DOS CANALES CONFIGURABLES INDEPENDIENTES

MODO OPERADOR LIBRE

SENSORES PARA CONTROLAR EL AUMENTO TÉRMICO EN LA PIEL.

TRATAMIENTO SIMULTÁNEO DE DOS ZONAS CON DIFERENTES
AMBIENTACIONES.

TRATAMIENTO SIMULTÁNEO DE DOS PACIENTES CON ENTORNOS DIFERENTES.

PROTOCOLOS PREESTABLECIDOS



www.suplidor.com.mx

Tel: 55 5659 7100

WhatsApp: 55 3459 6988

Mail: info@suplidor.com.mx

AHORA COMIENZA A
AMARLO ...

brera[®]
medical technologies

MADE IN ITALY

