

## 目次

①1つのプログラムを再生する【シンプルメニュー（青）】	1
②5つのプログラムを同時再生する【シンプルメニュー（青）】	6
③5つのプログラムを同時再生する【プロメニュー（オレンジ）】	8
④1つのプログラムを自動で再生する【プロメニュー（オレンジ）】	10
⑤プログラムリストから再生する【プロメニュー（オレンジ）】	12
⑥プログラムリストからプログラムを検索して再生する	14
⑦ひらがなに切り替える	16
⑧漢字に切り替える	16
⑨個人	17
⑩個々の記録	27
⑪マイページ	30
⑫言語	36

## 操作マニュアル【応用編】

I. 自分専用の【カテゴリー】を作成・編集・削除する	38
II. 自分専用の【コース】を作成・編集・削除	47
III. 自分専用の【プログラム】を追加・編集・削除	56

## プレイリストの操作方法

I. 自分専用の【プレイリスト】を作成・編集・削除する	66
II. 自分専用の【コース】を作成・編集・削除	69
III. 自分専用の【プログラム】を追加・編集・削除	71
IV. 作成したオリジナルコースを連続再生する	79


# レゾナンスアプリ操作マニュアル

※このマニュアルではプロフェッショナルコース（1200種類のプログラムが聞ける契約）で説明しておりますが、どの契約でも使える機能は同じになります。

## ①1つのプログラムを再生する【シンプルメニュー（青）】

### 1-1. アプリを開く

タブレット内にサイマティクスアプリがあります。  
画面内にある【RESONANCE】のアプリをタッチします。

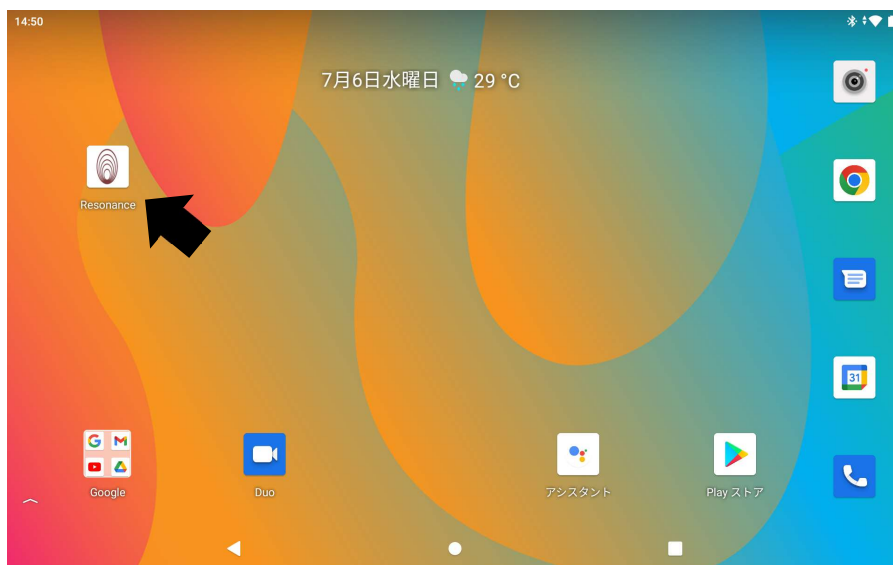

### 1-2. 【シンプル】をタッチして下さい。



1-3. 12種類のカテゴリーが表示され、スクロールすると全ての【カテゴリー】を確認できます。



■ お好みのカテゴリーをタッチして下さい。

1-4. 画面の中央にコース一覧が表示されるので、お好みの【コース】をタッチします。



■ スクロールをすると全てのコースを確認することができます。

1-5. コースの右側に表示された【トーンリスト】をタッチします。



1-6. プログラムリストの一覧が表示されます、一番上の【プログラム】の名称部分をタッチします。



選択されたプログラムが肌色に変わり、  
画面左上の□にそのプログラム名が表示されます。



### 1-7. 時間の設定をする

画面上部にある紫色のタイマーの隣の空白の部分タッチします。



※最初の設定は1分になっています。

- 1-8. キーボードでお好みの分数を入力し、紫色のタイマーをタッチ。  
画面右上にある【▶】をタッチするとプログラムが再生されます。



※時間を設定すると、紫色のタイマーの右隣りにある時間表示が設定した時間になります。

※最大24時間まで設定可能です。例) 11時間7分なら【 1107 】と入力します。

- 1-9. プログラムの停止は、画面右上にある【■】ボタンをタッチするとプログラムは停止します。



■最後までプログラムを再生した場合も、途中でプログラムを停止した場合もタイマーで設定した時間はそのままになります。

## ②5つのプログラムを同時再生する【シンプルメニュー青】】

2-1. 聞きたいプログラムリストを表示します。



2-2. プログラムリストからお好みのプログラムを5つまで選び、左の【 □ 】の中をタッチし、チェックを入れて下さい。



2-3. 時間の設定をする ※「1-7. 時間の設定をする」を参照。

2-4. 画面右上にある【▶】をタッチすると、プログラムが同時再生されます。





### ③5つのプログラムを同時再生する【プロメニュー（オレンジ）】

3-1. 【プロ】をタッチして下さい。



3-2. お好みの【カテゴリー】と【コース】を選んでタッチします。



※下へスクロールすると全てのコースを確認できます。

3-3. 【コース】を選択すると【プログラム】が表示されます。

【プログラム】からお好みのプログラムを選び、左の【】をタッチしてチェックを入れて下さい。



※5つまで選択が可能です。

チェックを入れると画面左上のにそのプログラム名が表示されます。

※スクロールすると全てのプログラムを確認できます。

3-4. 時間を設定する ※「1-7. 時間を設定する」を参照。

3-5. 画面右上にある【▶】をタッチするとプログラムが同時再生されます。

#### ④ 1つのプログラムを自動で再生する【プロメニュー（オレンジ）】

4-1. 【プロ】をタッチして下さい。



4-2. お好みの【カテゴリー】と【コース】を選んでタッチします。



4-3. プログラムの一覧が表示されますので、プログラムの名称をタッチして下さい。

■プログラム名が緑色に変わり、画面左上の欄にそのプログラム名が表示されます。



4-4. 時間を設定する。※「1-7. 時間を設定する」を参照。

4-5. 画面右上にある【▶】をタッチするとプログラムが再生されます。




■1プログラムずつ自動的に最後まで再生されます。

## ⑤プログラムリストから再生する【プロメニュー（オレンジ）】

5-1. 画面中ほどの右の【プログラムリスト】をタッチします。



5-2. プログラム一覧が表示されますので、プログラム名右側の空白をスクロールさせて、お好みのプログラムを選んで、左の【 □ 】をタッチ。

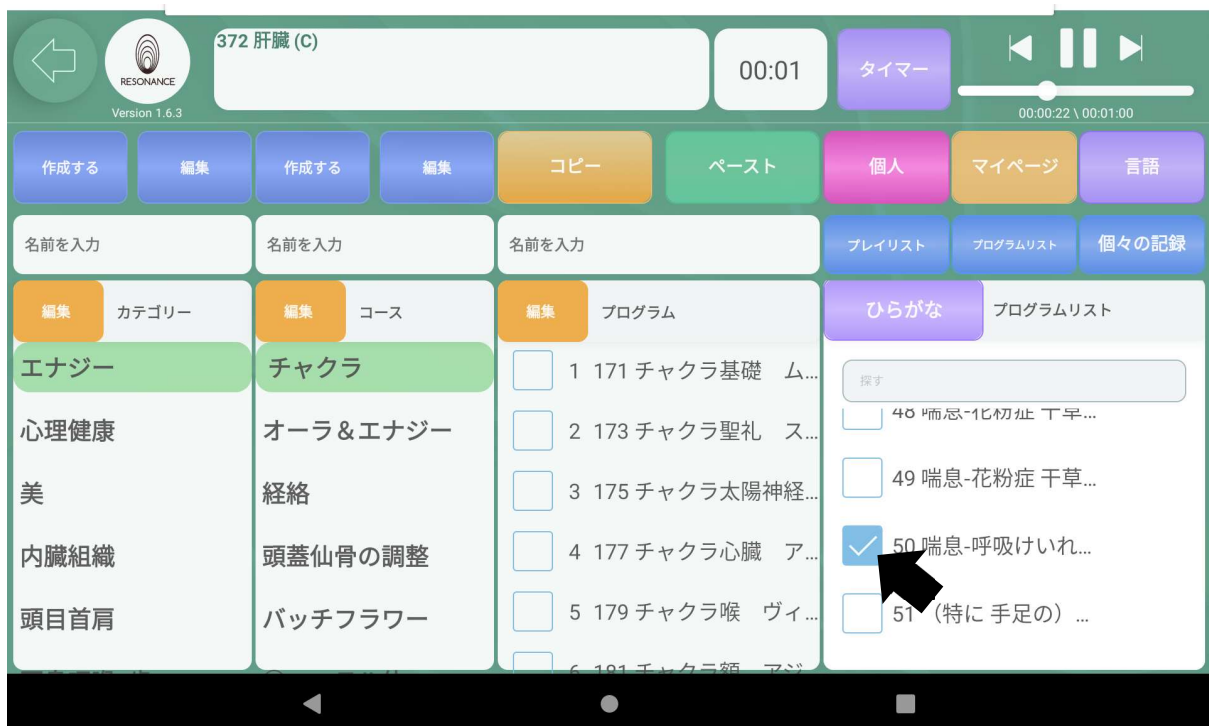

※5つまで選択が可能です。

お好みのプログラムを選択すると画面上部で確認ができます。



5-3. 時間を設定する。※「1-7. 時間を設定する」を参照。

5-4. 画面右上にある【▶】をタッチすると、プログラムが同時再生されます。

## ⑥プログラムリストからプログラムを検索して再生する

6-1. プロコース画面右の【プログラムリスト】をタッチし、その下にある【探す】をタッチします。




6-2. 画面にキーボードが表示されますので、「ひらがな」、「キーワード」「プログラムの番号」を入力して下さい。

入力後、右下の【確定】をタッチして下さい。



6-3. プログラム一覧が表示されますので、お好みのプログラムを選び、左の【 □ 】をタッチしてチェックを入れて下さい。

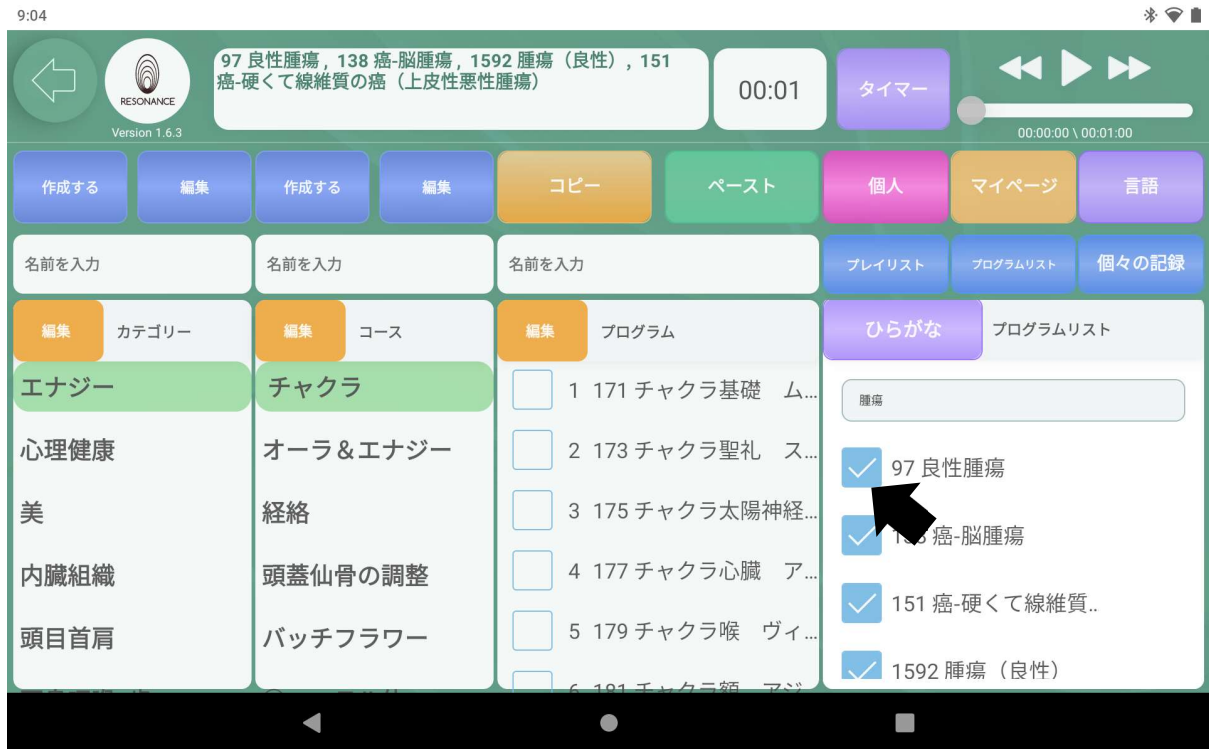

※5つまで選択が可能です。

6-4. 時間を設定する。※「1-7. 時間を設定する」を参照。

6-5. 画面右上にある【 ▶ 】をタッチすると、プログラムが同時再生されます。



## ⑦ひらがなに切り替える

7-1. 画面右上にある紫色の【ひらがな】をタッチします。



## ⑧漢字に切り替える

8-1. 画面右上にある紫色の【漢字】をタッチします。



## ⑨個人

ユーザーカードを作成して、個人情報と※施術歴を管理します。

※施術歴とはプログラムの再生履歴のことです。

### 〈自分の個人情報の確認〉

9-1. 画面右上にある赤色の【個人】をタッチします。



9-2. 画面の【MyCard】をタッチします。



9-3. 自分の登録した個人情報（ユーザーカード）が確認できます。

※最初は【MyCard】に自分の登録した情報がございます。



### 〈施術歴の確認〉

9-4. 上記の黒い○の画面上でスクロールすると【施術歴】も確認できます。

9-5. 画面右側の【施術歴】の下の【もっと見せる】をタッチすると、

施術歴の続きを確認できます。



### ③ユーザーカードの編集

9-6. 画面右側の緑色の【編集】をタッチします。

※ユーザーカード内の最上部にある【アプリ登録日】以外は編集可能です。



9-7. 編集したい項目の画面をタッチします。

例：【名前】を「MyCard」から「山田」に変更します。



9-8. キーボード内の【×】をタッチして【名前】の「MyCard」を削除します。変更したい名前を入力して【確定】をタッチします。



9-9. 【名前】の編集と同じ方法で【住所】、【電話番号】、【Mail】、【誕生日】、【他の情報】の編集も行えます。

誕生日は2000年7月30日の場合は「30072000」と入力します。

9-10. 編集が終わりましたら、画面右下の【セーブ】をタッチします。



9-11. 最初の画面に戻り、変更が反映されました。

※ユーザーカードに反映されるまで時間がかかる場合がございます。



## 〈ユーザーカードの追加方法〉

※自分以外の人にプログラムを当て、プログラムの施術歴を残し、確認したい場合は、まずはユーザーカードに登録したい人の情報を追加します。

9-12. 画面右側の青色の【追加】をタッチします。



9-13. ユーザーカードに追加したい人の個人情報を全て入力します。  
 各項目をタッチして、キーボードで情報を入力します。  
 【他の情報】のみ未記入でも可。



9-14. 個人情報の入力を終えたら、右下の【セーブ】をタッチします。





9-15. 最初の画面に戻り、ユーザーカードの追加が反映されました。

※ユーザーカードに反映されるまで時間がかかる場合がございます。



### 〈追加したユーザーカードの編集〉

9-16. 編集したいユーザーカードをタッチします。

詳細はP19 〈ユーザーカードの編集〉を参照。



## 〈ユーザーカードの削除〉

9-17. 削除したいユーザーカードをタッチします。



9-18. 画面右上の赤色の【削除】をタッチします。



9-19. 【消去してもよろしいですか?〇〇】と表示されますので、【はい】をタッチします。



9-20. ユーザーカードが1つ削除されました。



## ⑩個々の記録

【個人】でユーザーカードを選択して【セーブ】をタッチすると、その人の個人情報が【個々の記録】に反映されます。

下にスクロールすると今までの【施術歴】も確認できます。

例：「田中 太郎」さんの場合

10-1. 画面右上の赤色の【個人】をタッチして、【田中 太郎】さんのユーザーカードをタッチします。



10-2. 画面右下の【セーブ】をタッチします。



※【セーブ】をタッチすると、次のプログラムの再生から田中さんの【個々の記録】の下の「施術歴」に再生履歴が記録されます。

10-3. 元の画面に戻るので、画面右上の青色の【個々の記録】をタッチします。



10-4. 田中さんの個人情報を確認できます。



10-5. 下にスクロールすると田中さんの施術歴を確認できます。  
 詳細はP18〈施術歴の確認〉を参照。



## ⑪マイページ

11-1. 画面右上にある黄色の【マイページ】をタッチします。



## 〈顧客情報〉

11-2. 登録した個人情報を確認することができます。



## 〈クーポン〉

11-2. 画面左側の【クーポン】をタッチします。



11-3. 現在の契約コース（灰色）を確認することができます。

例：professionalコースを契約している場合

他のコースの契約を依頼する場合は、購入したエージェントに  
問い合わせして下さい。





## 〈購入履歴〉

契約コースの変更などがあった場合は購入履歴を確認できます。

11-4. 画面左側の【購入履歴】をタッチします。



〈あなたの提案〉 ※2022年8月2日時点準備中となります。

【経済的な質問】 【技術的な質問】 でチャット対応が可能です。

11-5. 画面左側【あなたの提案】をタッチします。



11-6. 【経済的な質問】か【技術的な質問】をタッチします。

画面上部の☆はアプリの評価になります。（5段階評価）

例：☆4つの評価をつける場合

11-7. 左から4つ目の☆をタッチします。


11-8. 画面右下の□の空欄をタッチして、キーボードで質問を入力します。

11-9. □の空欄の右端にある送信マークをタッチすると質問を送ることができます。




〈ユーザーマニュアル〉

11-10. 画面左側の【ユーザーマニュアル】をタッチします。

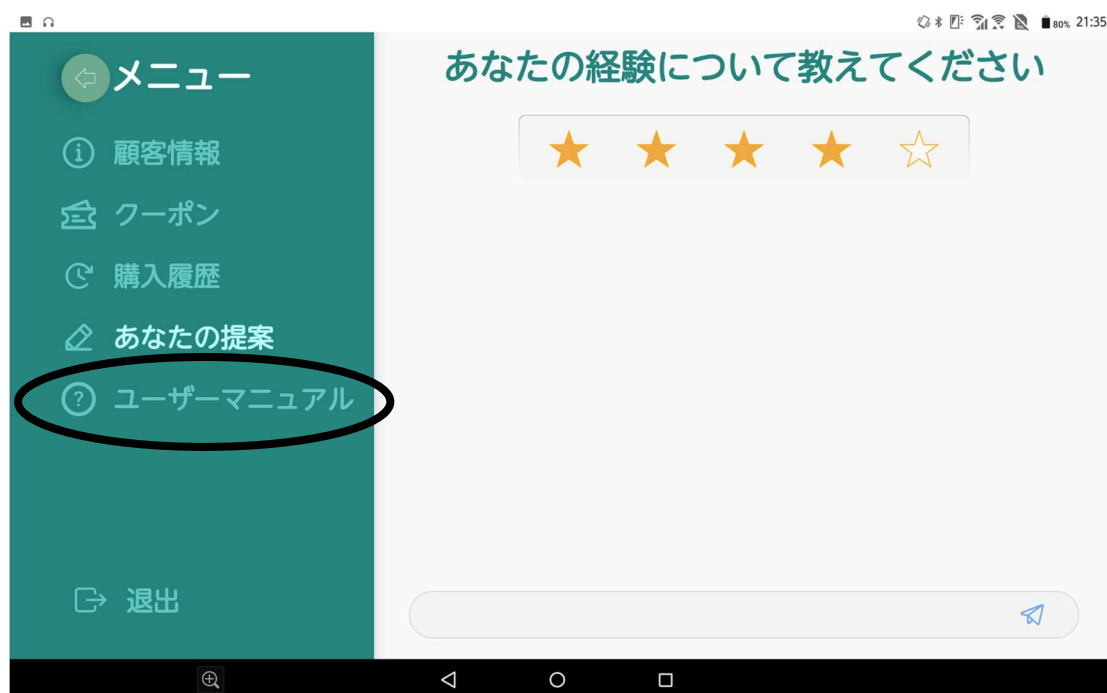

英語でのマニュアルを確認することができます。

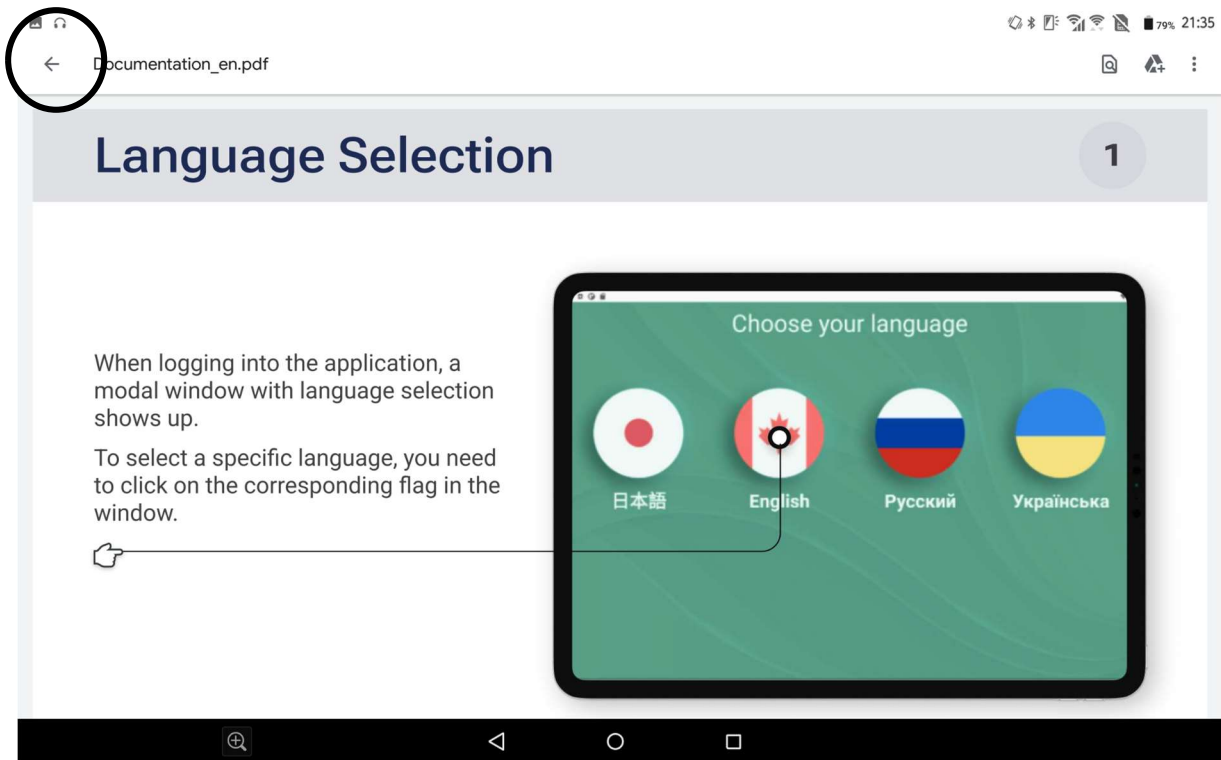


※戻る場合は画面左上の【←】をタッチします。

## 〈退出〉


11-11. 画面左下の【退出】をタッチします。



11-12. 退出をタッチすると、アプリを閉じることができます。

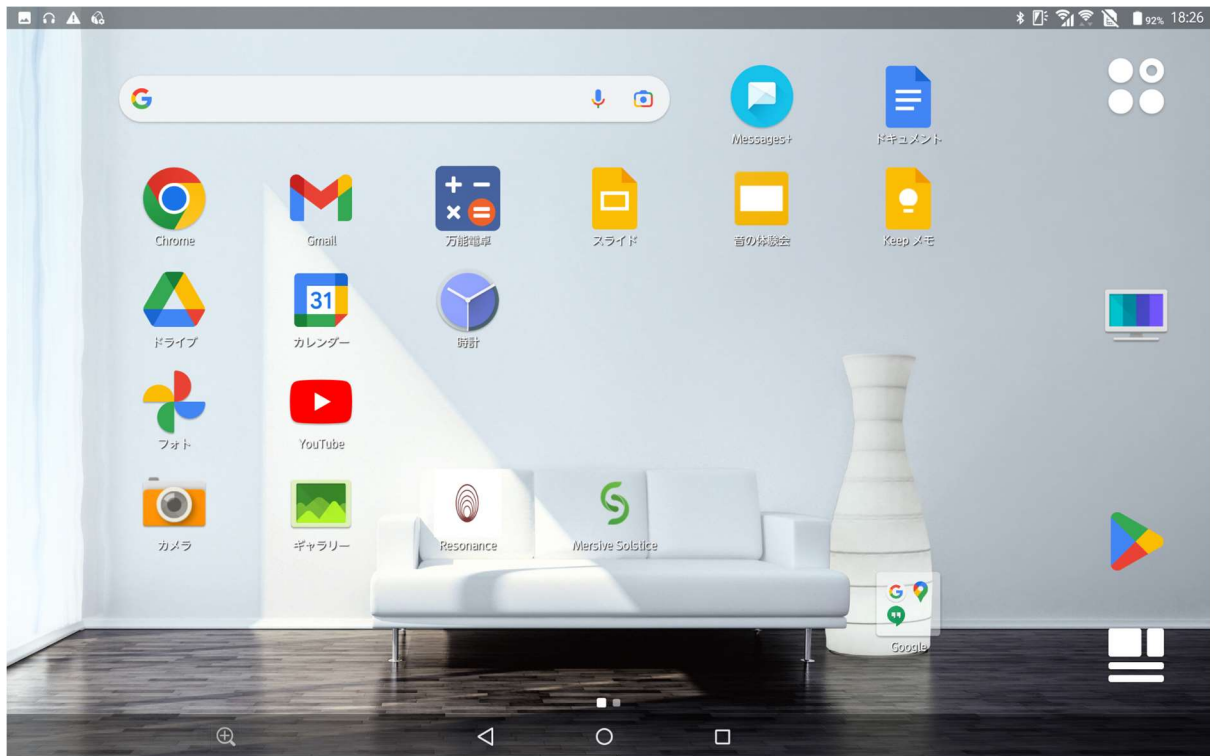

11-13. 画面右下の□をタッチすると、再びアプリの画面が現れます。

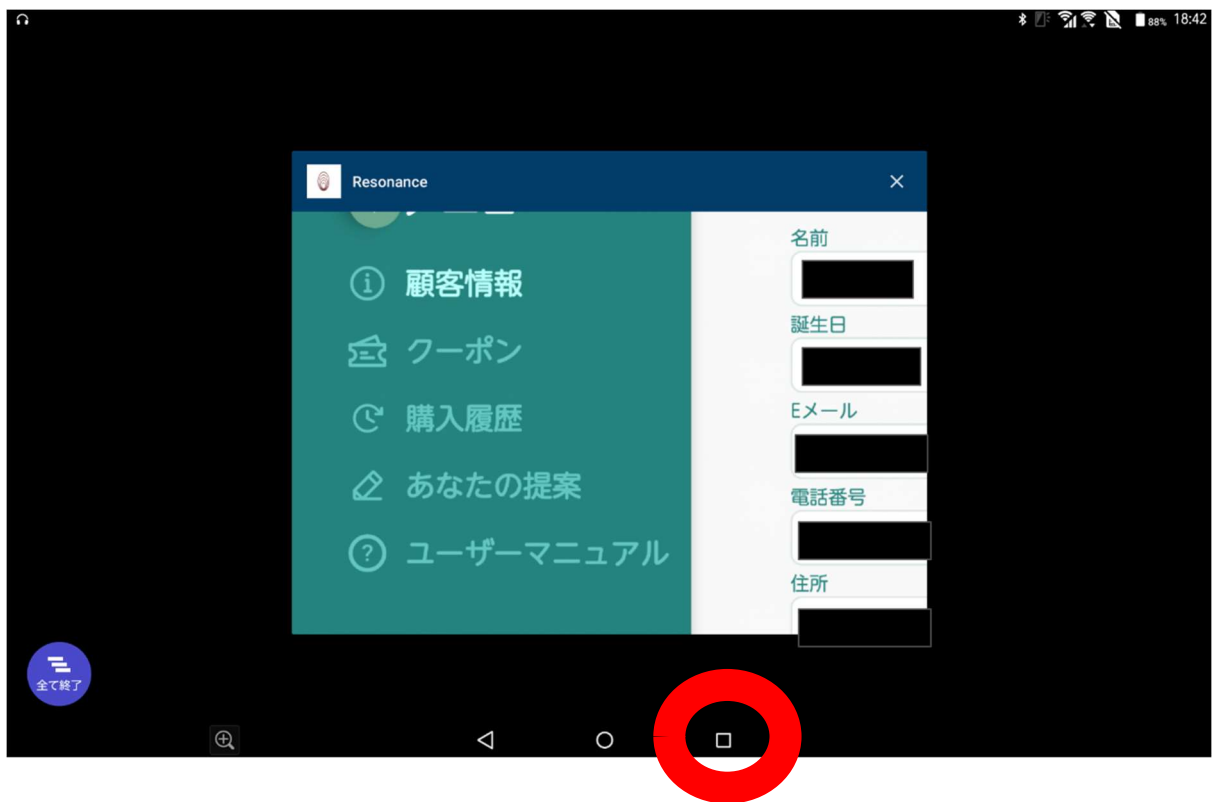


## ⑫言語

※2022年8月2日時点で言語は英語、ロシア語、ウクライナ語に変更  
できます。

例：言語を英語に変更する場合

12-1. 画面右上にある紫色の【言語】をタッチします。

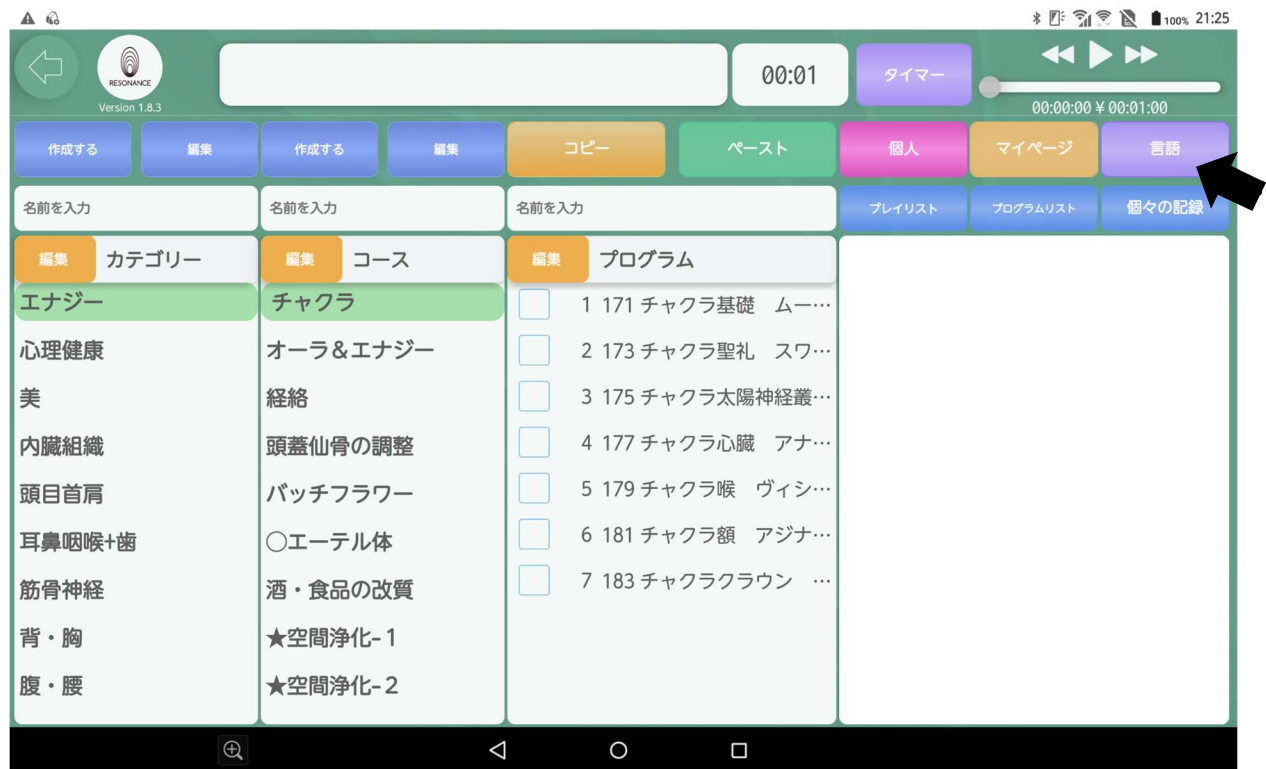


12-2. 画面内の【English】をタッチします。



12-3. 【言語を変更してもよろしいですか?】と表示されますので、【はい】をタッチします。



12-4. 言語が英語に変更されました。

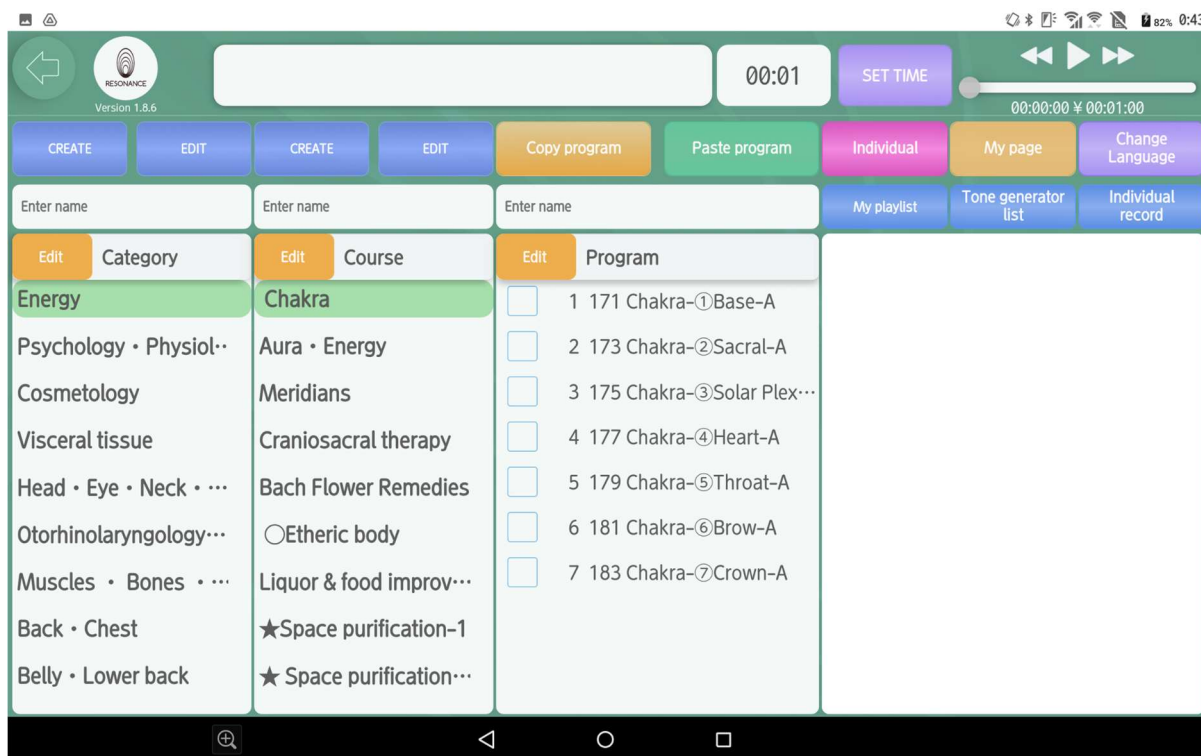

※同様に他の言語に変更することもできます。

# 操作マニュアル【応用編】

応用編では、プログラムをカスタマイズして再生する方法を順を追ってご説明致します。

## I. 自分専用の【カテゴリー】を作成・編集・削除する

※既存のカテゴリー・コース・プログラムの作成・編集・削除はできません。



## ①自分専用のカテゴリーを作成する

例：「筋肉」というカテゴリーを作成します。

1-1. 画面左上にある【名前を入力】をタッチします。



1-2. 作成したいコース名を入力します。

入力後、画面左上にある青い【作成する】をタッチします。






1-3. カテゴリーの一番下に作成したカテゴリーが追加されます。



## ②作成したカテゴリーの名称を変更する

例：「骨」から「筋肉」に名称を変更します。

2-1. 編集したいカテゴリーをタッチし、【名前を入力】をタッチします。

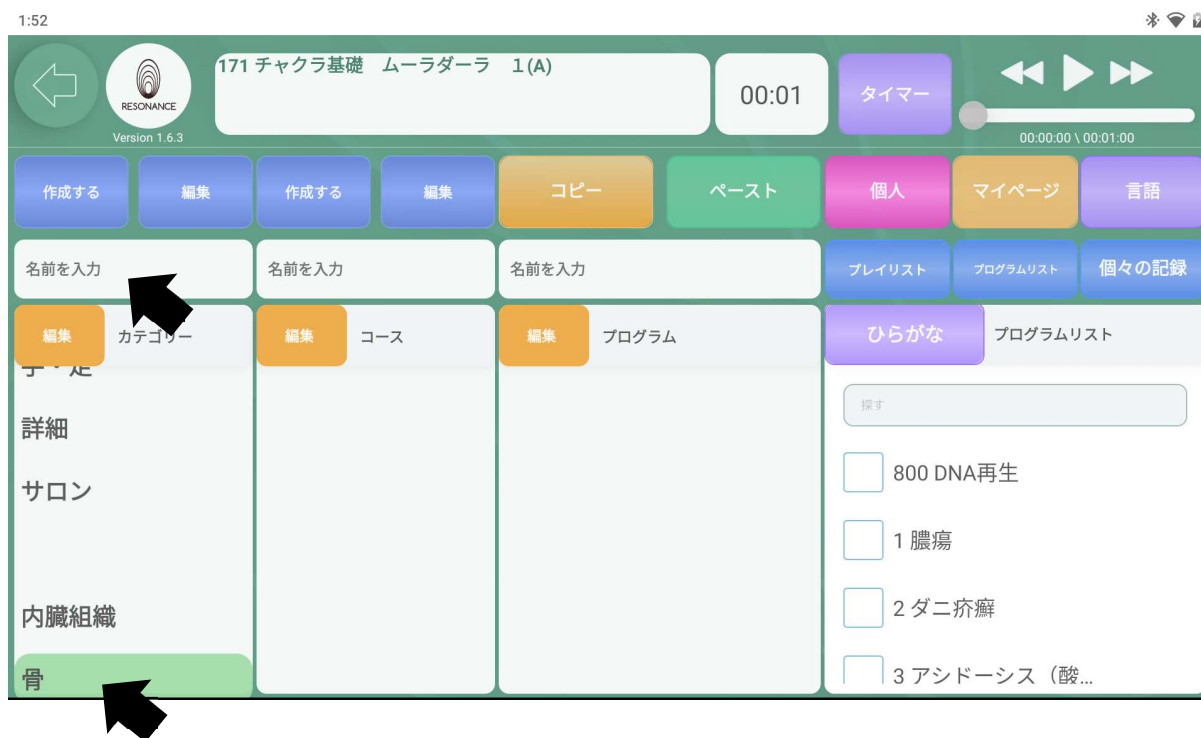


2-2. 変更したいカテゴリー名を入力します。

入力後、画面左上にある青い【編集】を指でタッチします。



2-3. 【編集】の表示が黄色い【セーブ】に切り替わるので、【セーブ】をタッチします。

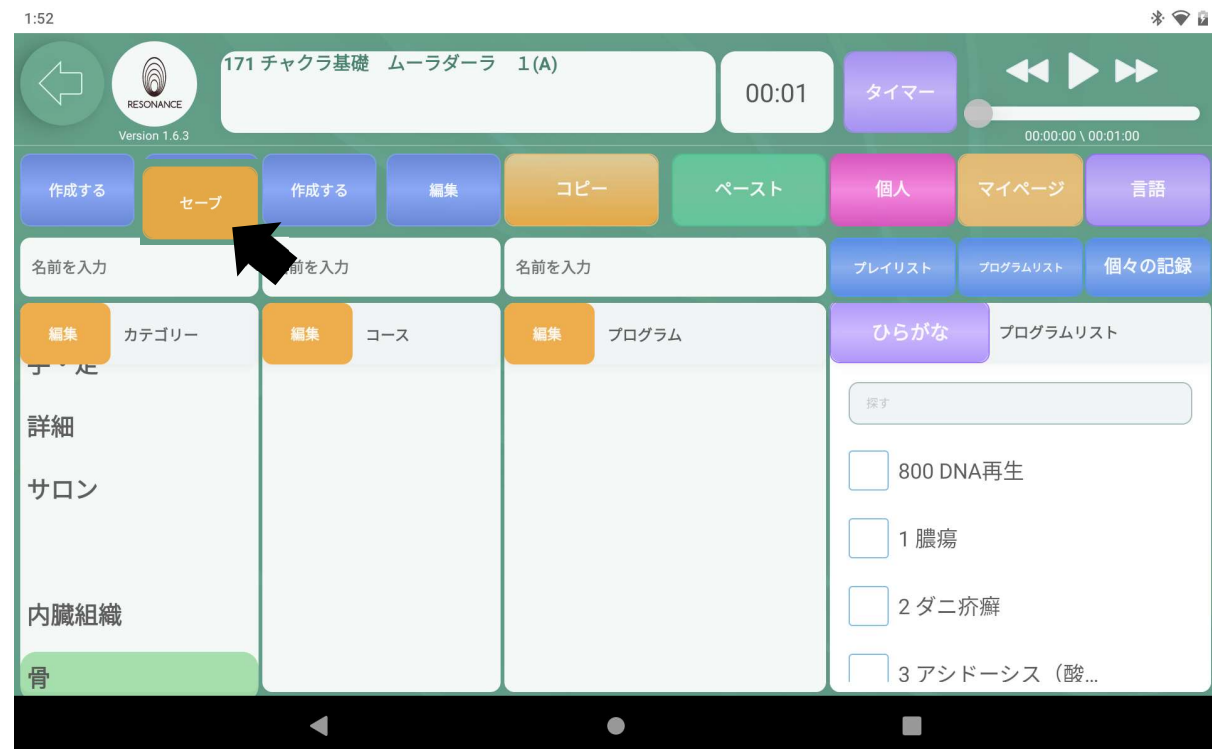

■ カテゴリー名が変更されて表示されます。




### ③作成したカテゴリーを削除する

3-1. 画面左にある【カテゴリー】の左隣の黄色い【編集】をタッチします。



■ 【カテゴリー】下の表示が変わります。


3-2. 削除したいカテゴリー左の【🗑️】ゴミ箱マークをタッチします。

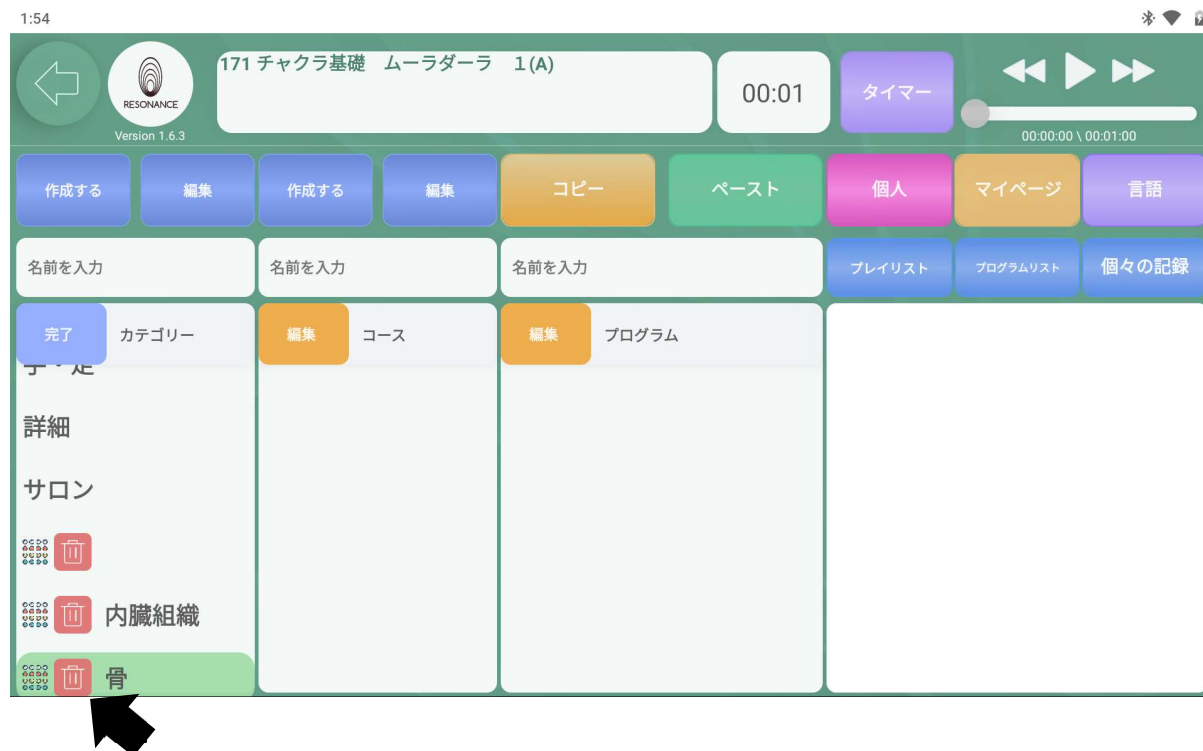

- 3-3. 【消去してもよろしいですか?〇〇】と表示されますので、【はい】をタッチします。



- 3-4. 終了したら【カテゴリー】の左隣の青い【完了】をタッチします。

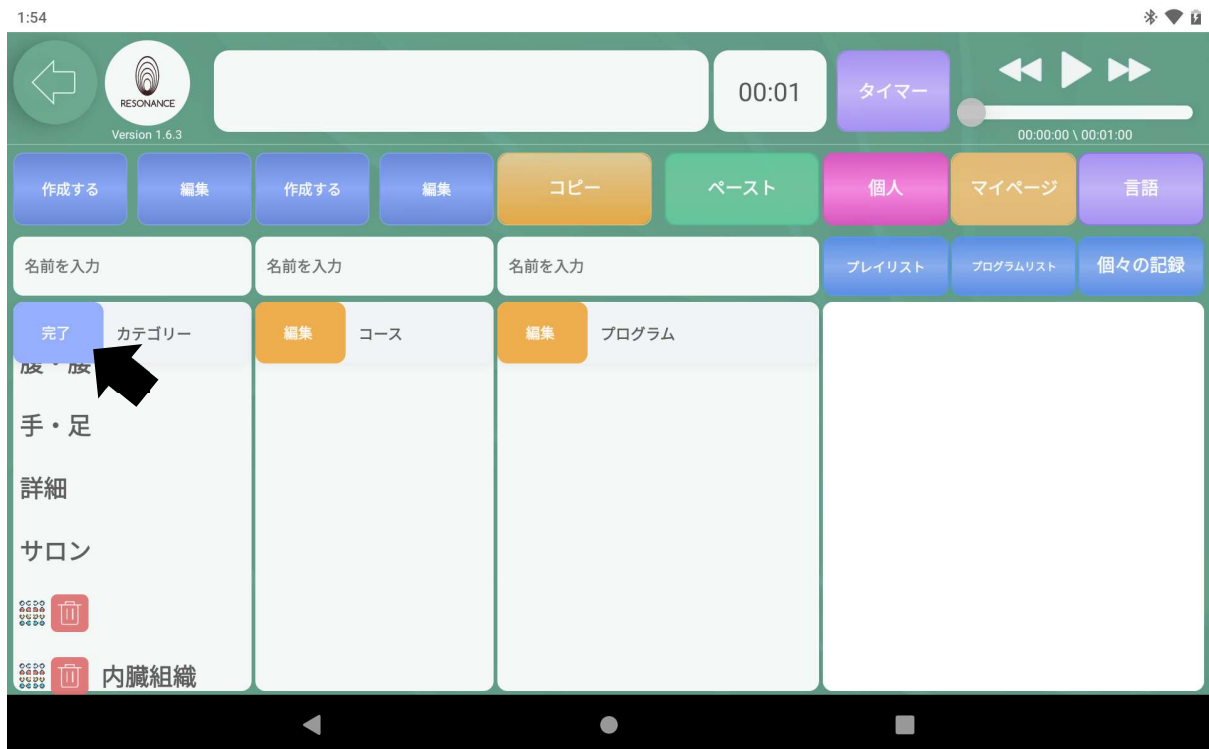


## ④作成したカテゴリーの順番を変更する


4-1. 画面左上にある【カテゴリー】左隣の黄色の【編集】をタッチします。



4-2. プレイリスト内の表示が下記のように変わります。

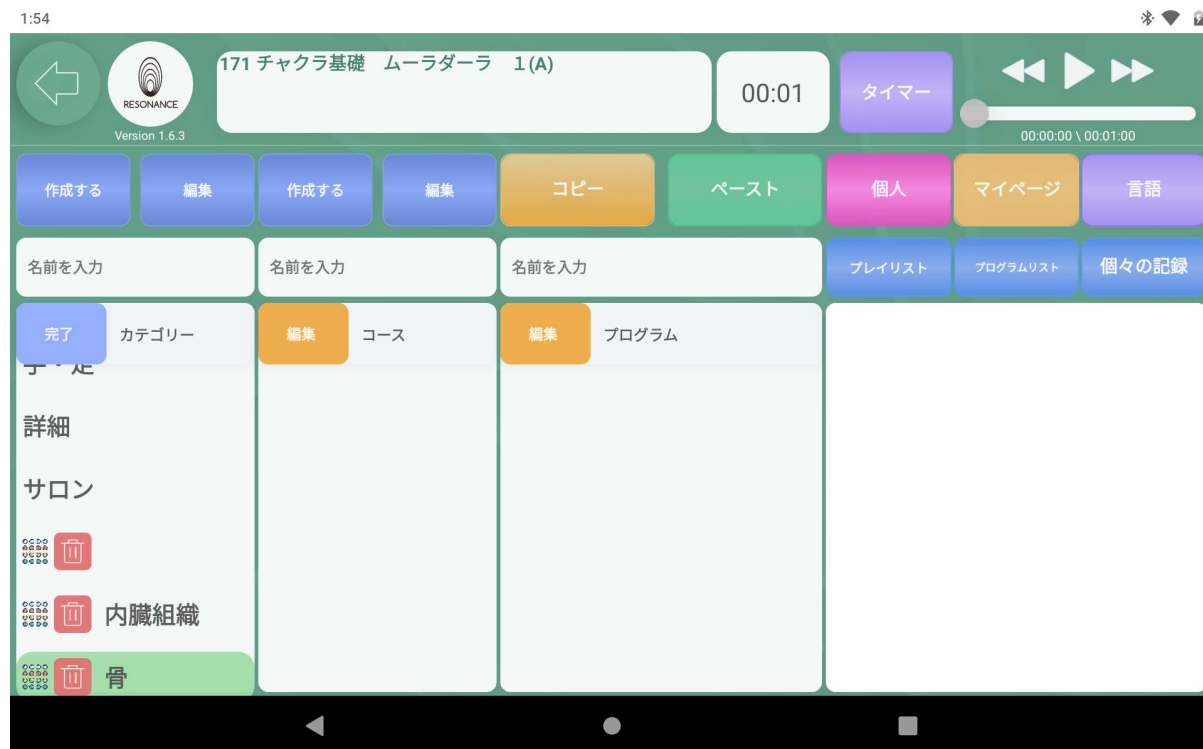

4-3. 左端の【。。。】の部分にタッチしたまま目的の位置まで移動させます。

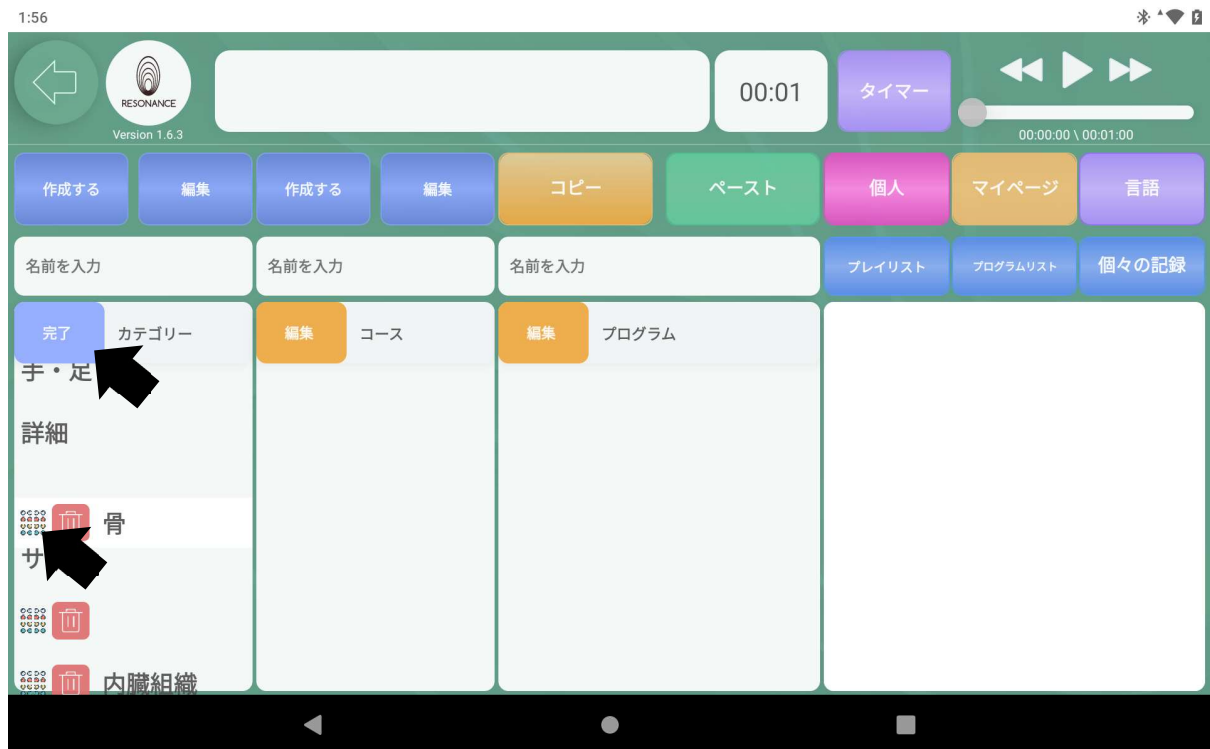

※反応しない場合はゆっくり行ってみてください。


終了したら【カテゴリー】の左隣の青い【完了】をタッチします。

## Ⅱ. 自分専用の【コース】を作成・編集・削除

### ①自分専用のコースを作成する

例：「足首」というコースを作成します。

- 1-1. どのカテゴリーにコースを作成するかを選択し、  
【コース】の上にある【名前を入力】をタッチします。

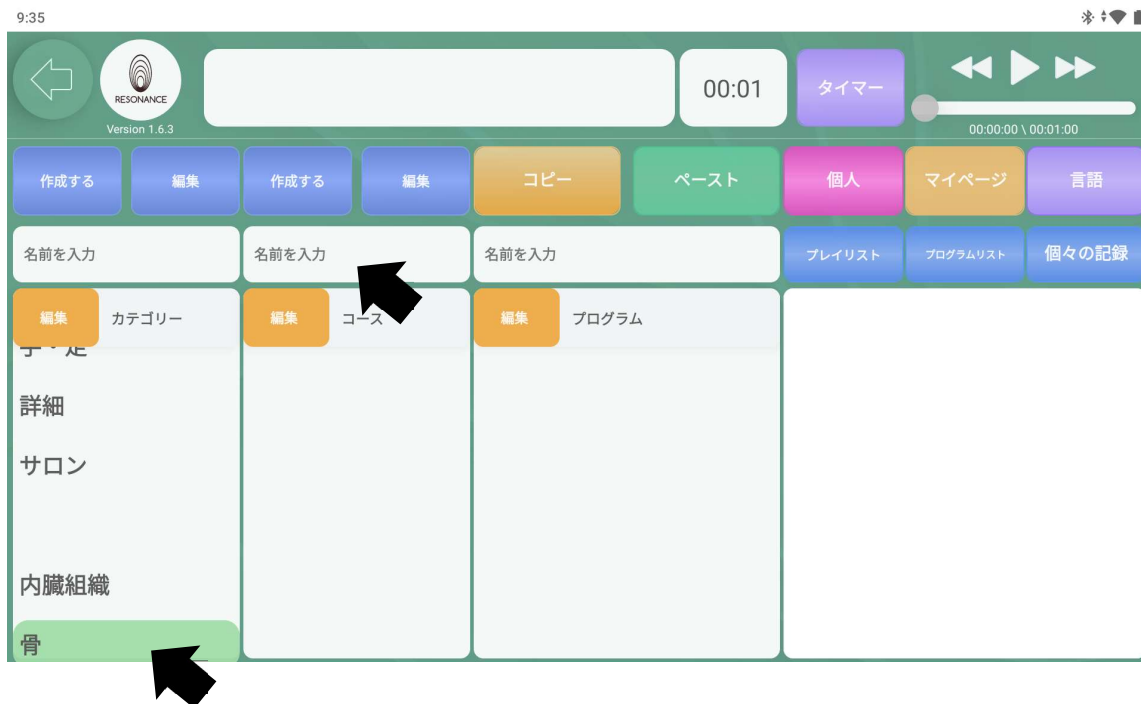


- 1-2. キーボードが表示されますので、コース名を入力し、  
画面上にある青い【作成する】をタッチします。






【 コース 】 の下に作成したコースが追加されます。

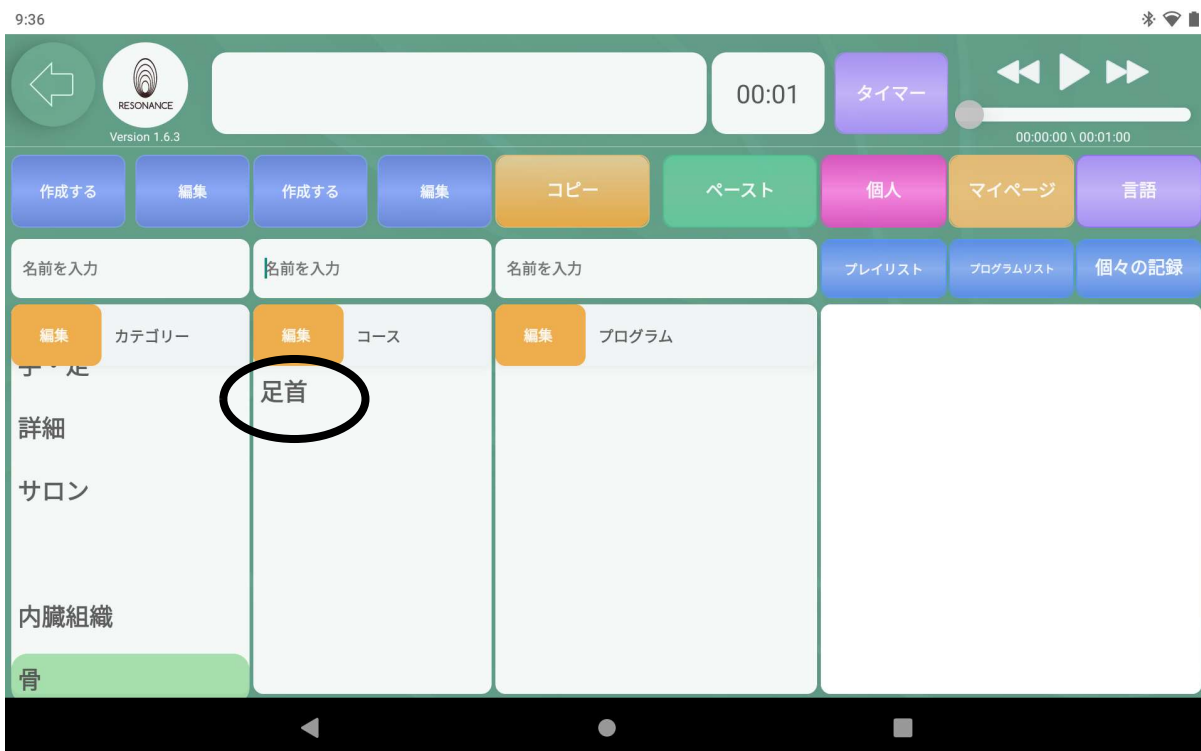

## ②作成したコースの名称を変更する


- 2-1. 編集したいコース名をタッチし、  
【コース】の上にある【名前を入力】をタッチします。

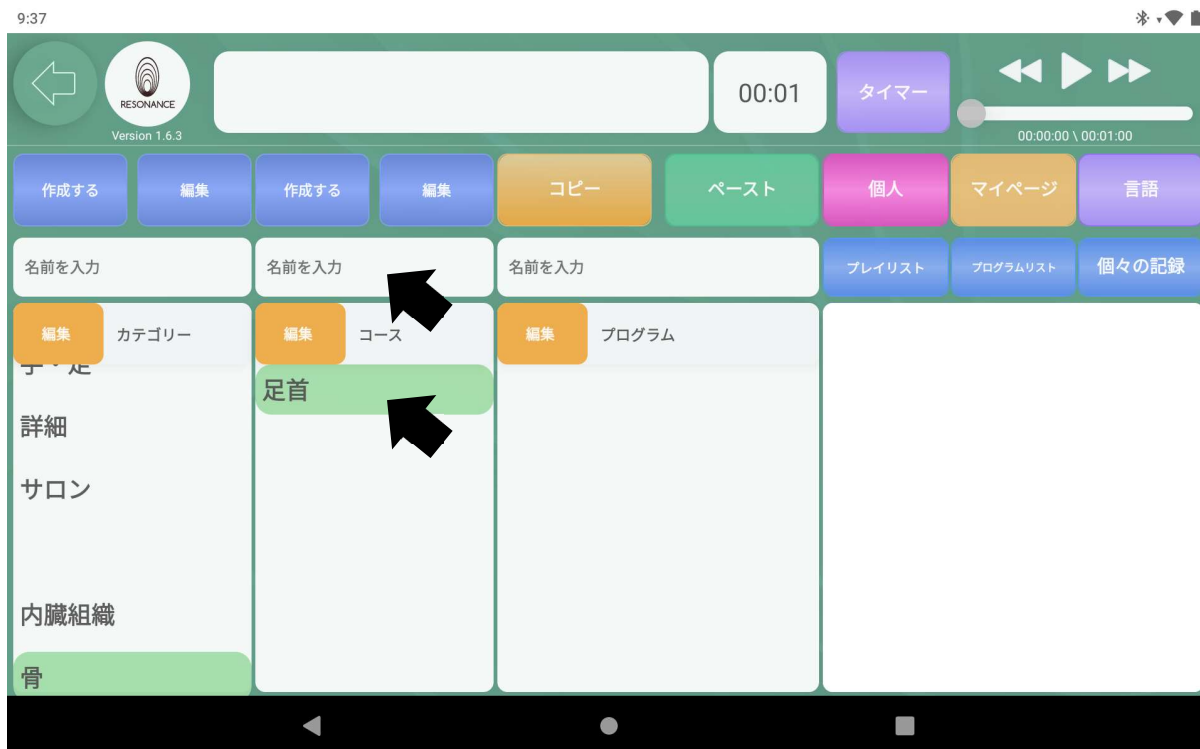


- 2-2. キーボードが表示されますので、コース名を入力します。




2-3. 画面上にある青い【編集】をタッチします。

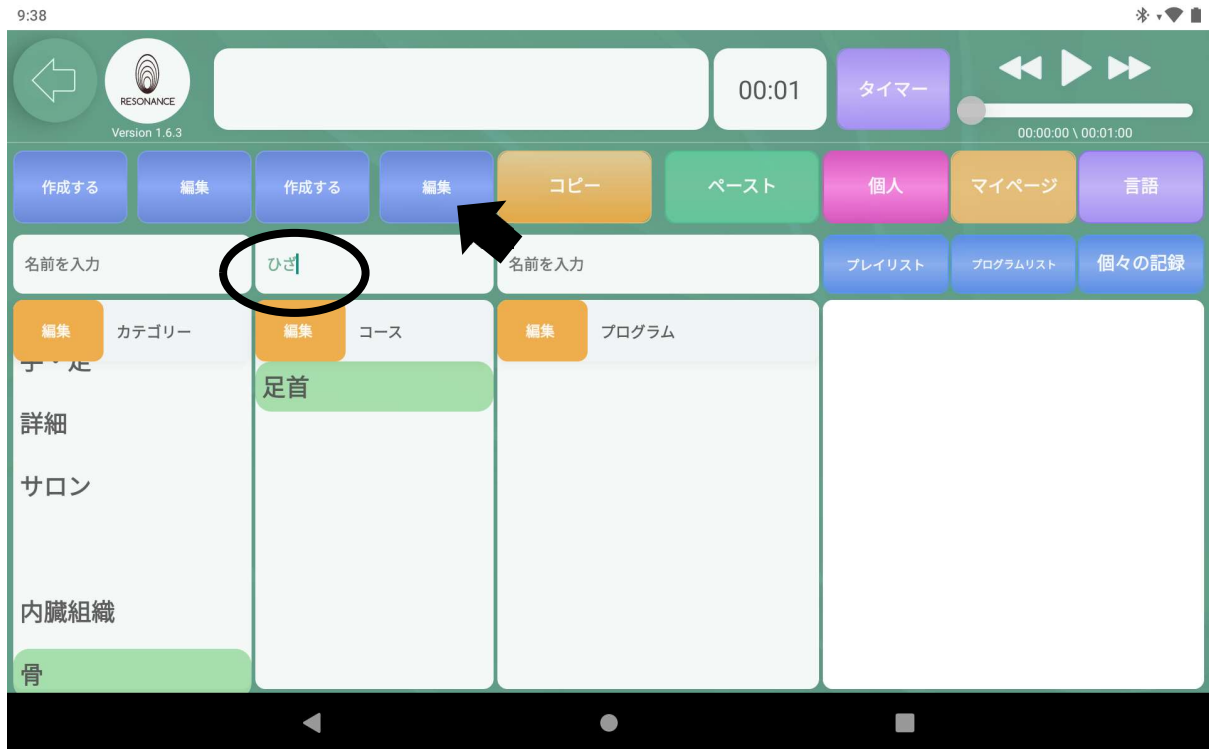

2-4. 【編集】の表示が黄色い【セーブ】に切り替わるので、【セーブ】をタッチします。

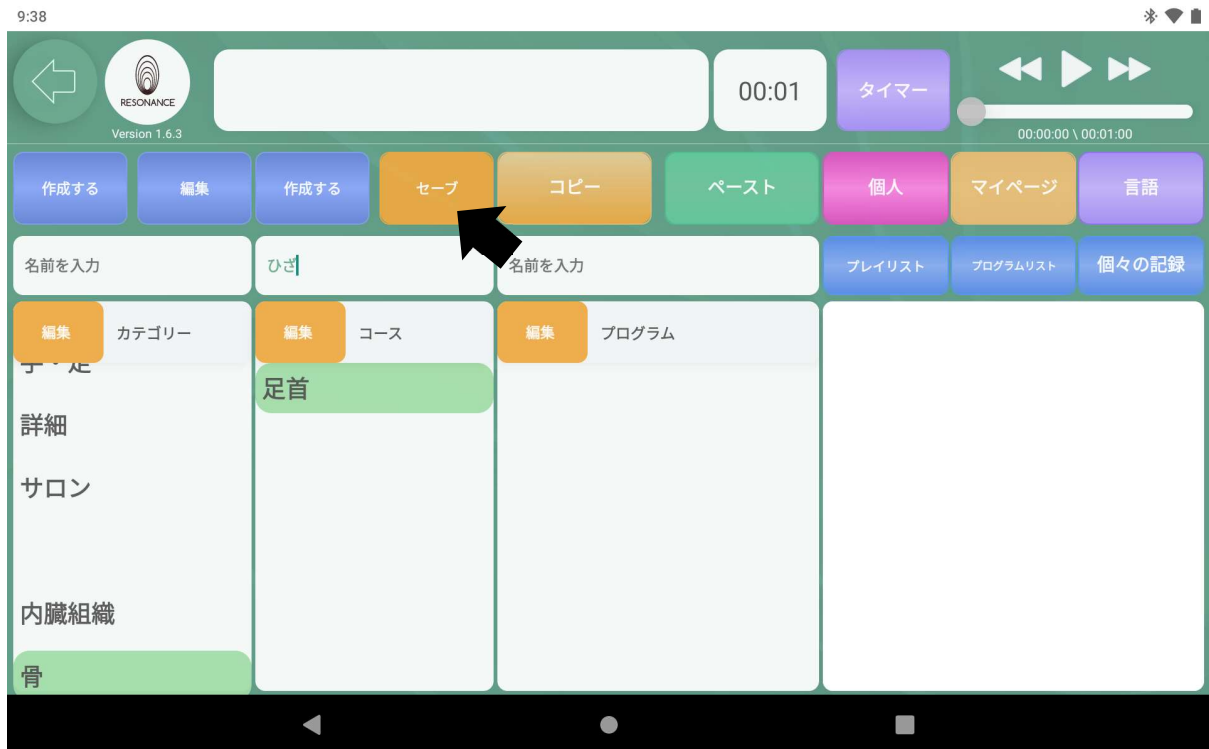


2-5. コース名が変更されて表示されます。

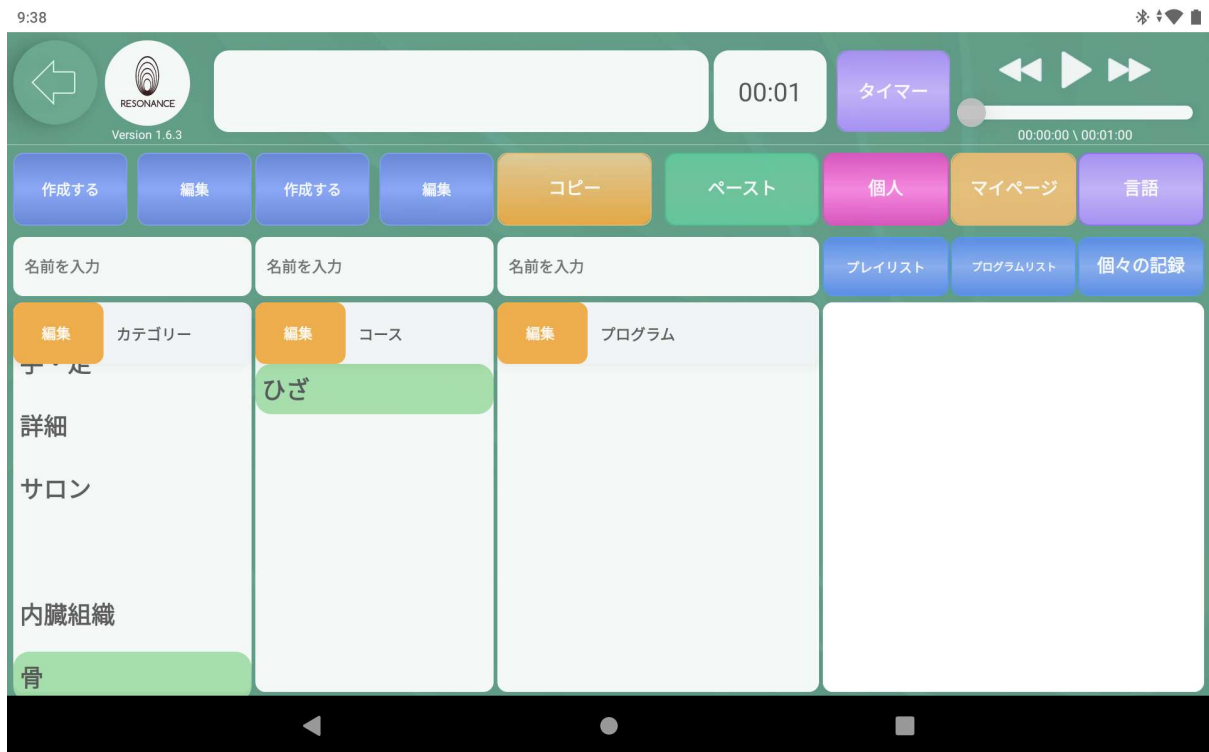


### ③作成したコースを削除する

3-1. 【コース】左隣の黄色い【編集】をタッチします。

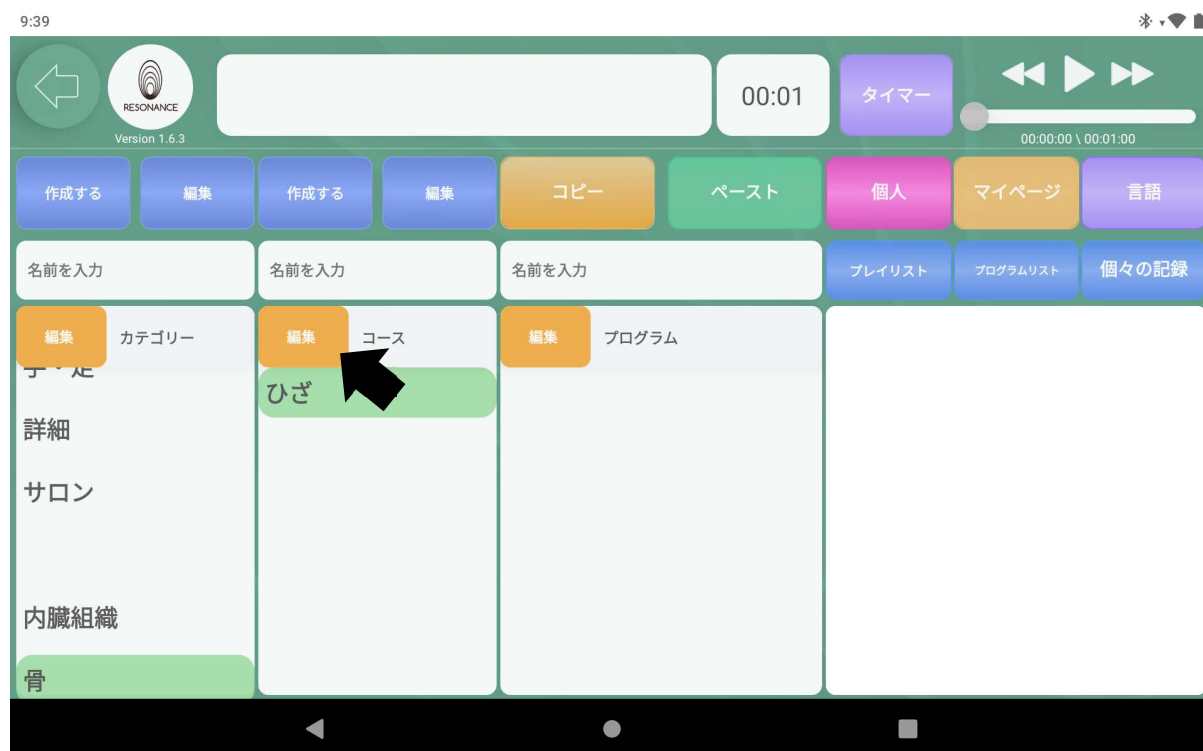


3-2. 削除したいコース名の左隣の【🗑️】ゴミ箱マークをタッチします。

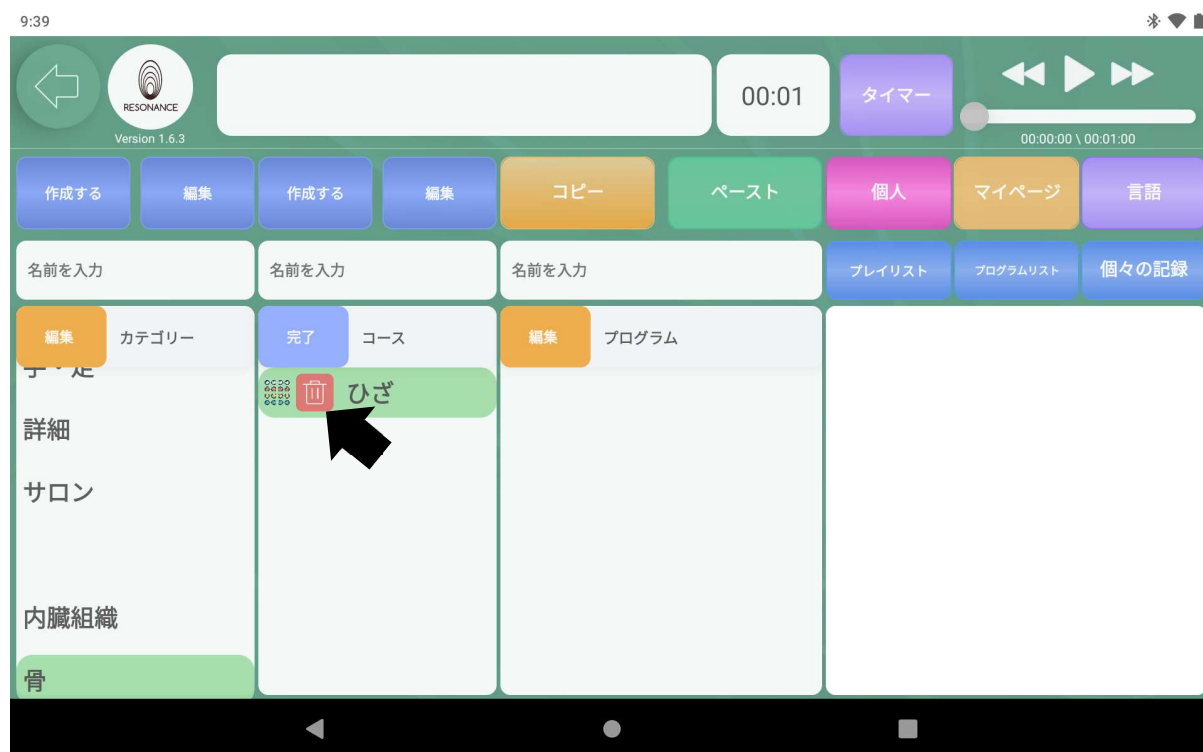

- 3-3. 【消去してもよろしいですか？〇〇】と表示されますので、【はい】をタッチします。




- 3-4. 終了したら【コース】の左隣の青い【完了】をタッチします。

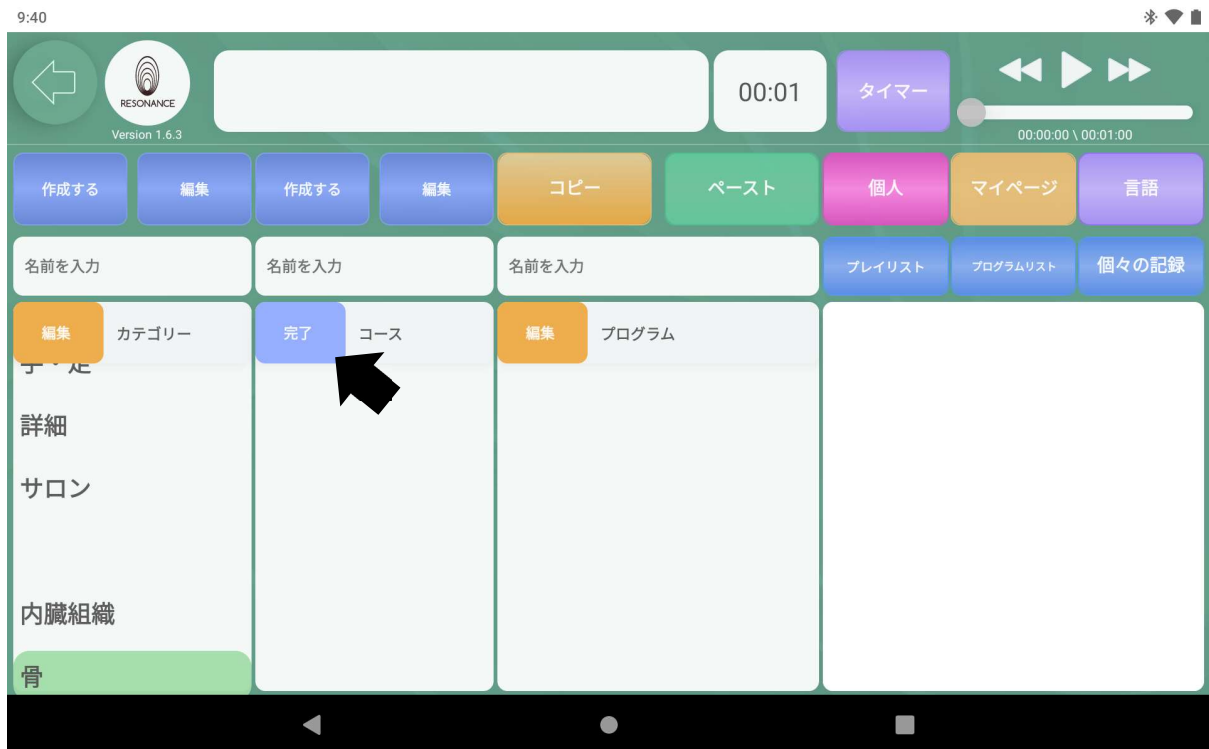


## ④作成したコースの順番を変更する


4-1. 【コース】の左隣の黄色の【編集】をタッチします。

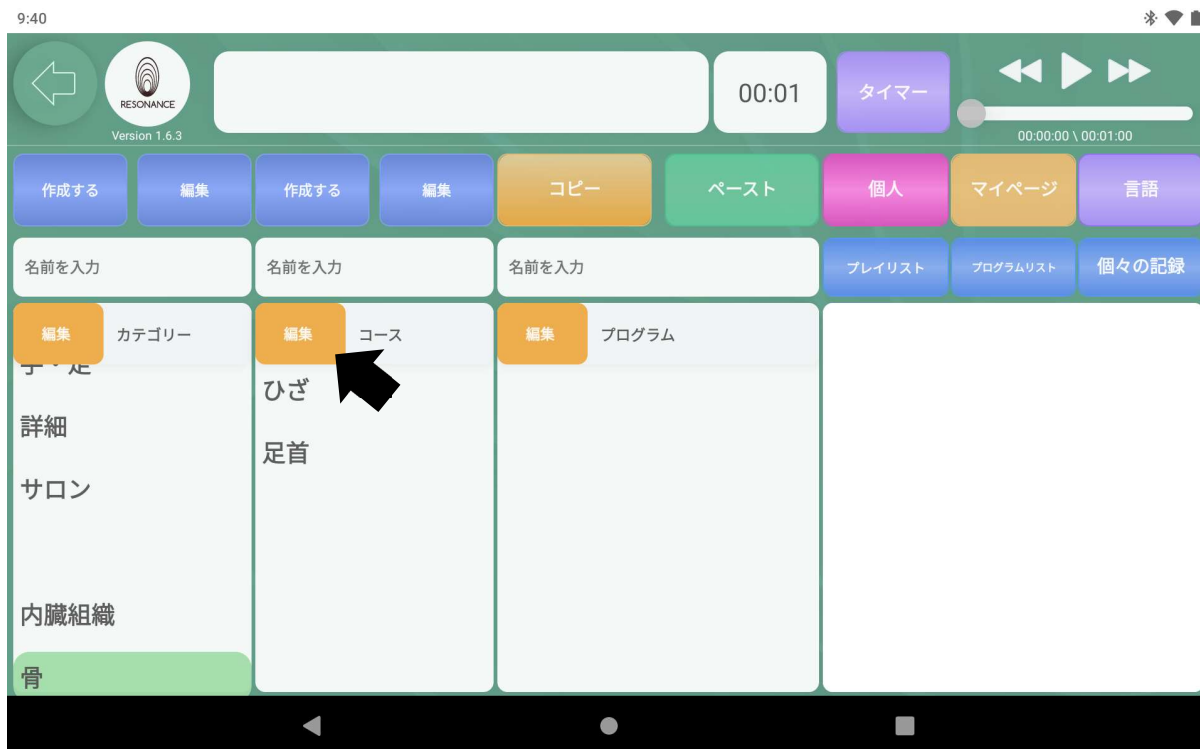

4-2. 左端の【。。。】の部分に指で触れたまま目的の位置まで移動させます。 終了したら【コース】の左隣の青い【完了】をタッチします。

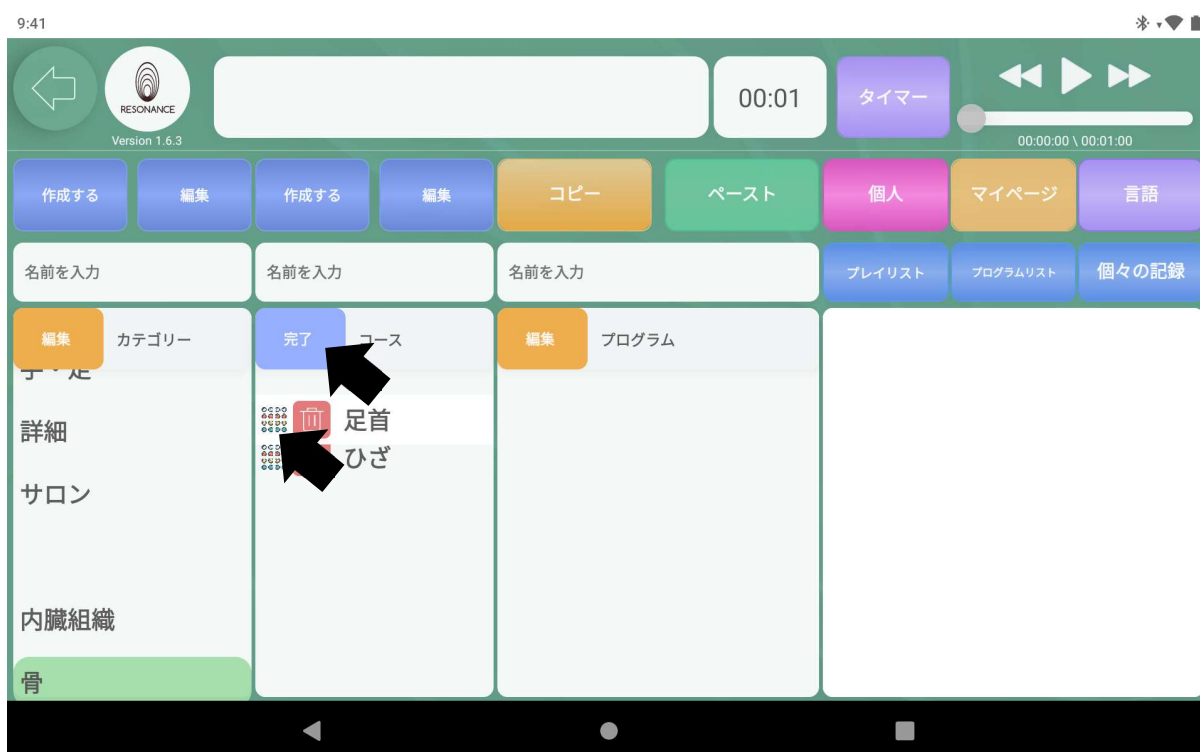

4-3. 並び順が変更されます。

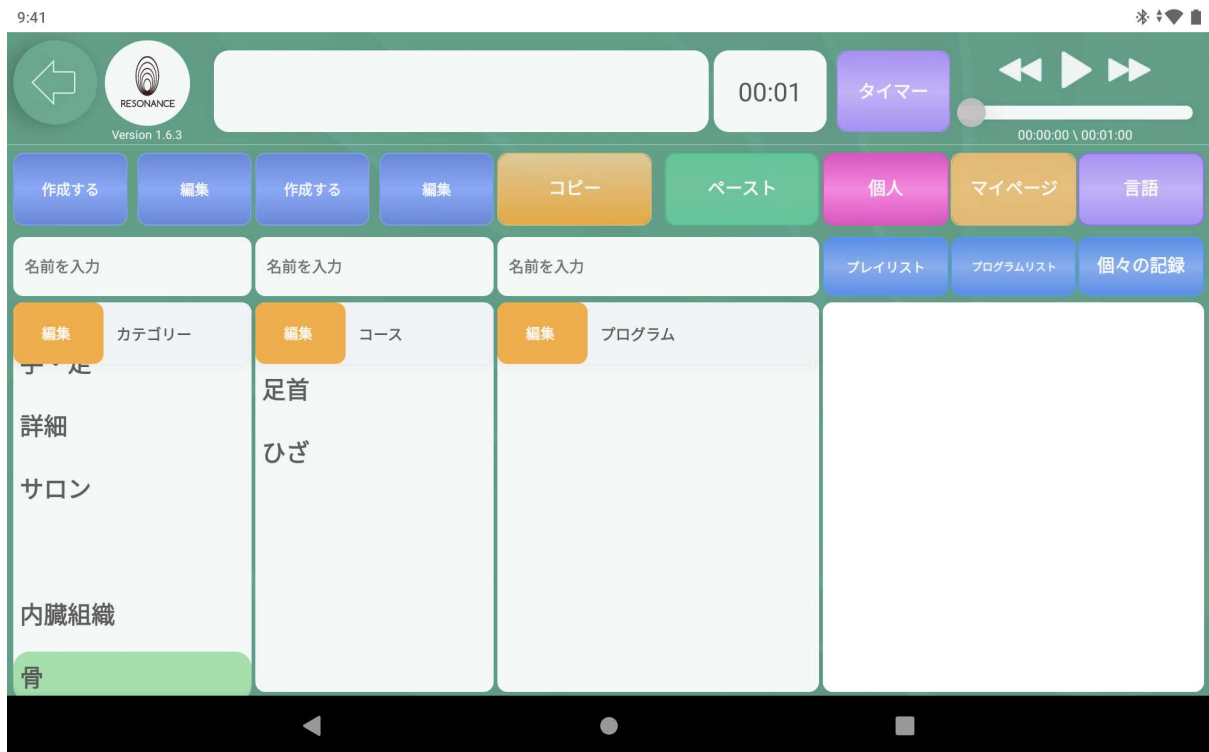




### Ⅲ. 自分専用の【プログラム】を追加・編集・削除

#### ① 「プログラムリスト」からプログラムを追加する


1-1. 追加したいコース名をタッチします。

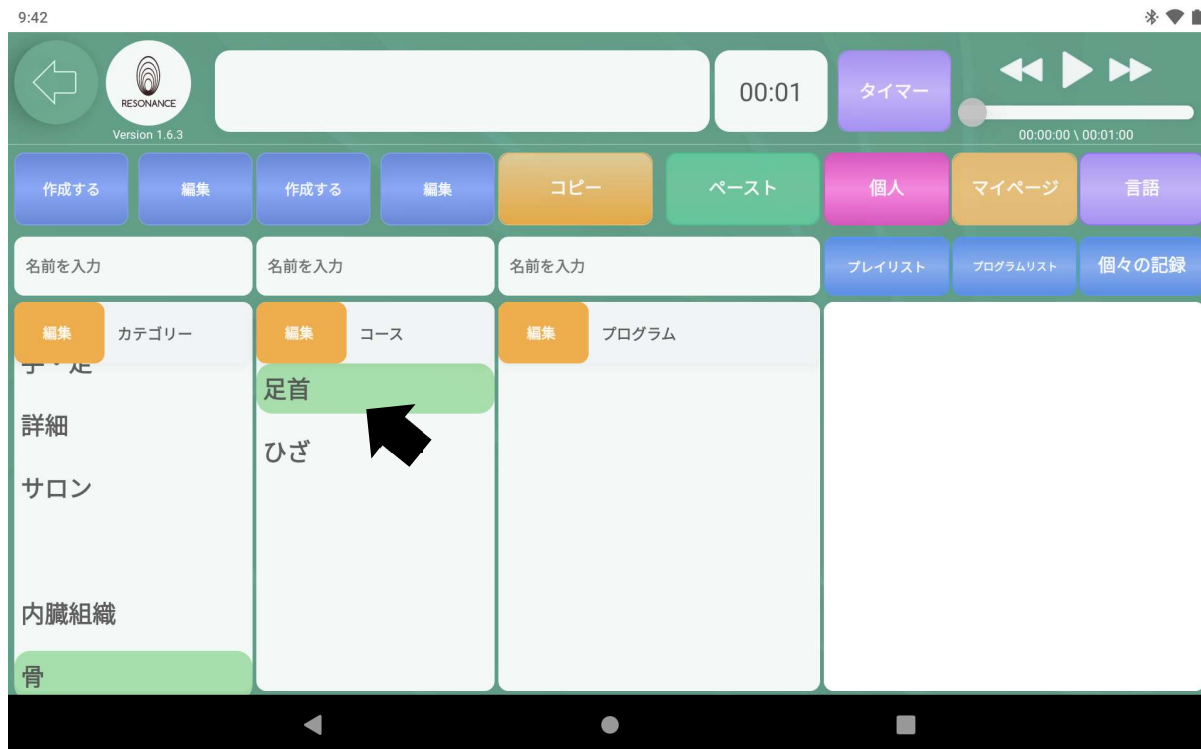

1-2. 右側にある【プログラムリスト】をタッチし、お好みのプログラムをタッチします。



1-3. 画面に浮かび上がったプログラムを移動（タッチしたままプログラムの箱まで移動させます）させます。

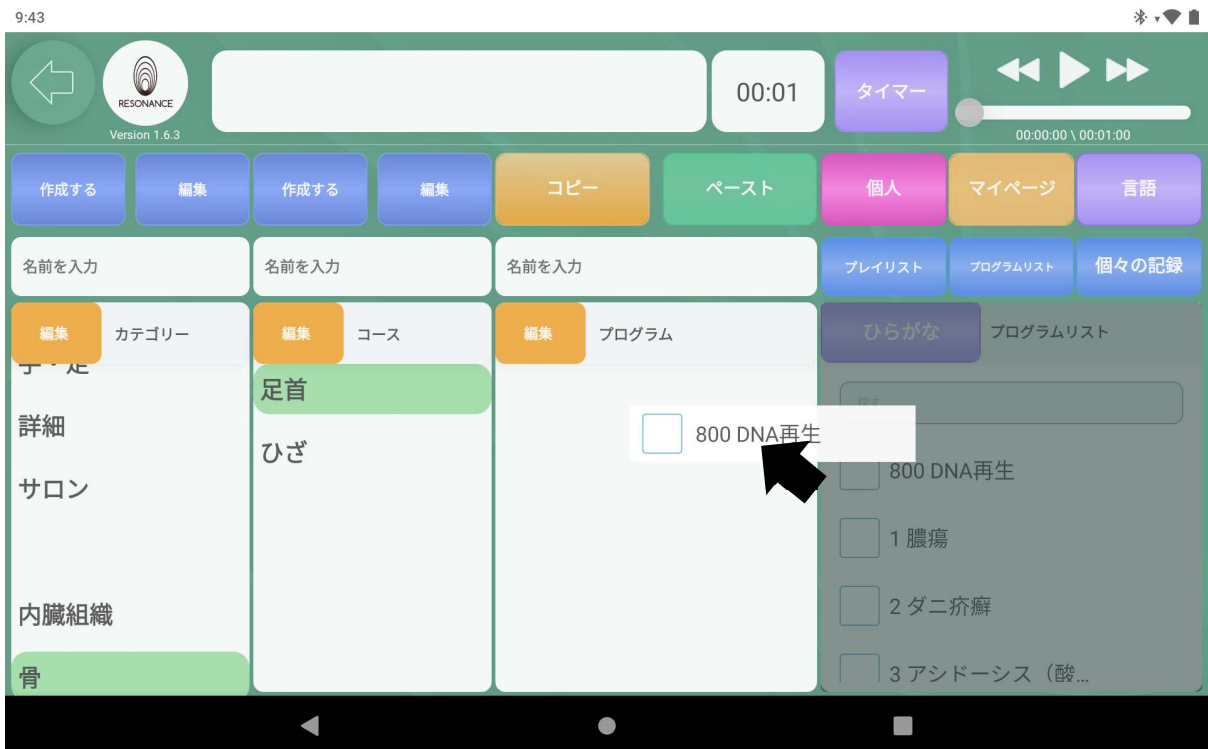

1-4. プログラム内にプログラムがコピーされ表示されました。



## ②既存プログラムを「まとめてコピー」してオリジナルコースに追加する


2-1. まとめてコピーしたい「カテゴリー」、「コース」を選びます。




2-2. プログラムが表示されたら、画面中央上の黄色い【コピー】をタッチします。



2-3. 貼り付けたい先の「カテゴリー」、「コース」を選択してタッチします。

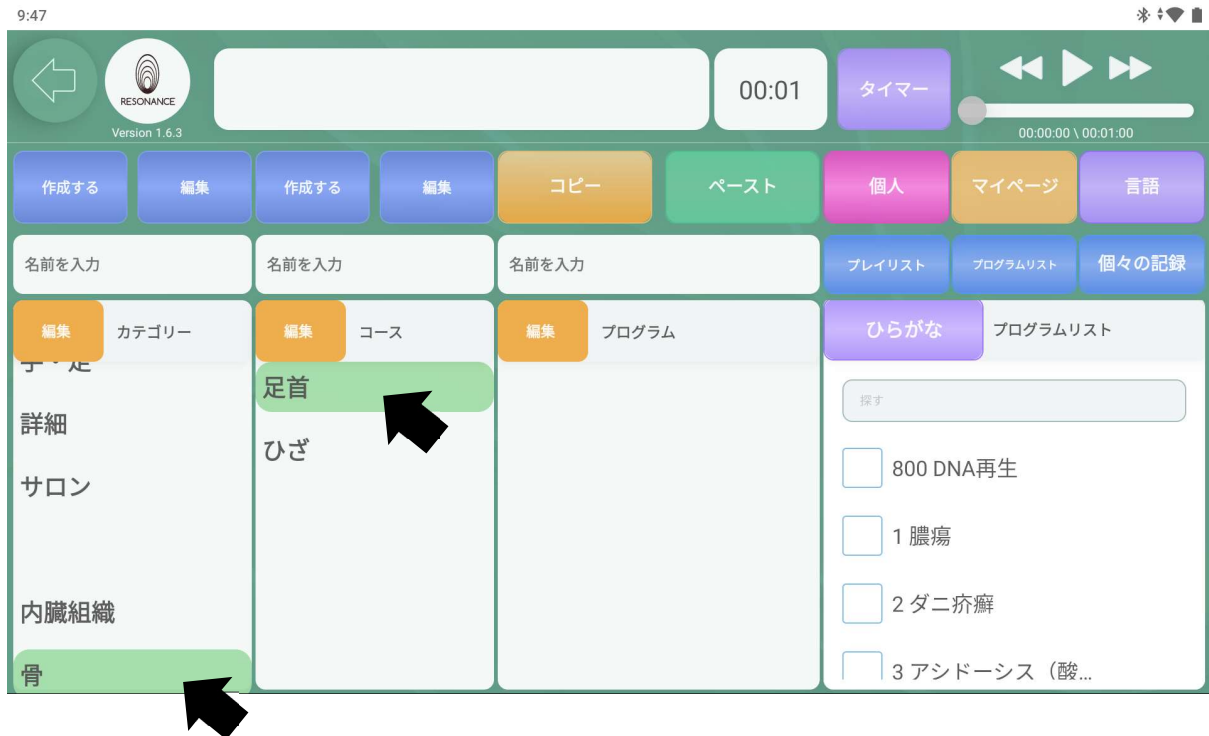

2-4. 画面中央上の緑色の【ペースト】をタッチします。

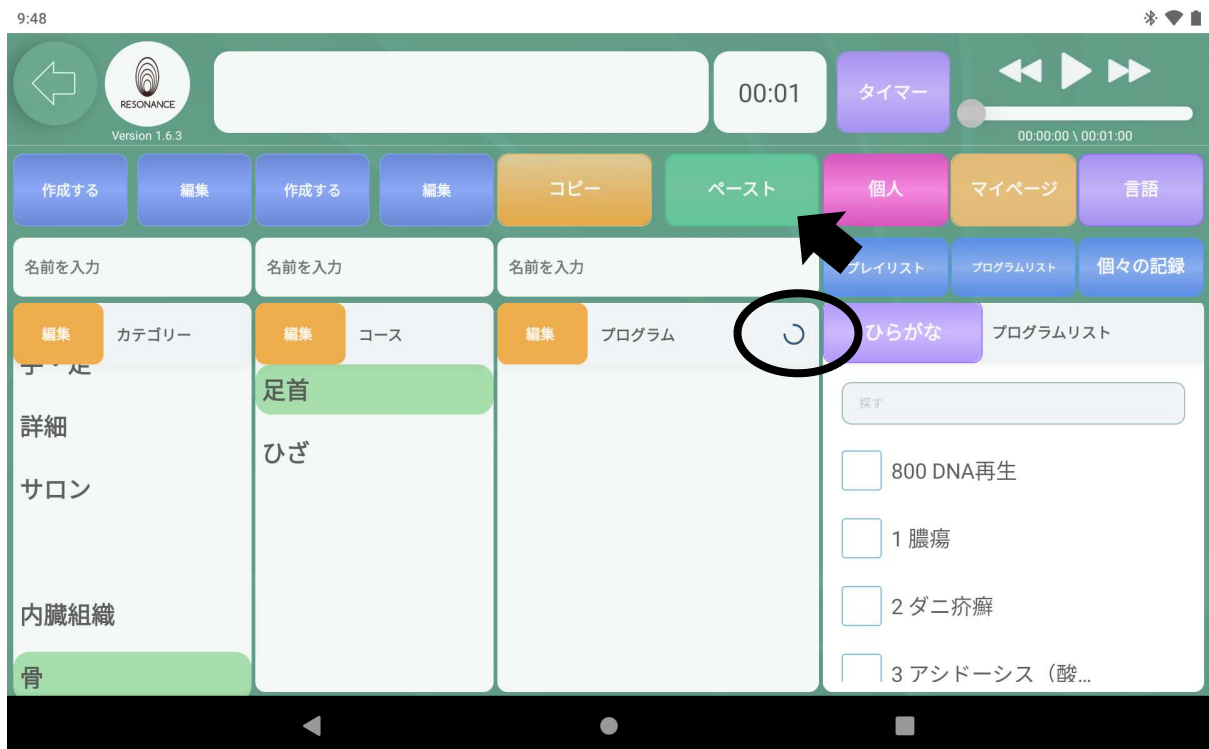

2-5. コピーしたプログラムが表示されました。




### ③プログラムを削除する

3-1. 左から3番目にある【プログラム】 左隣の黄色い【編集】をタッチします。



3-2. 削除したいプログラムの右隣の【🗑️】ゴミ箱マークをタッチします。

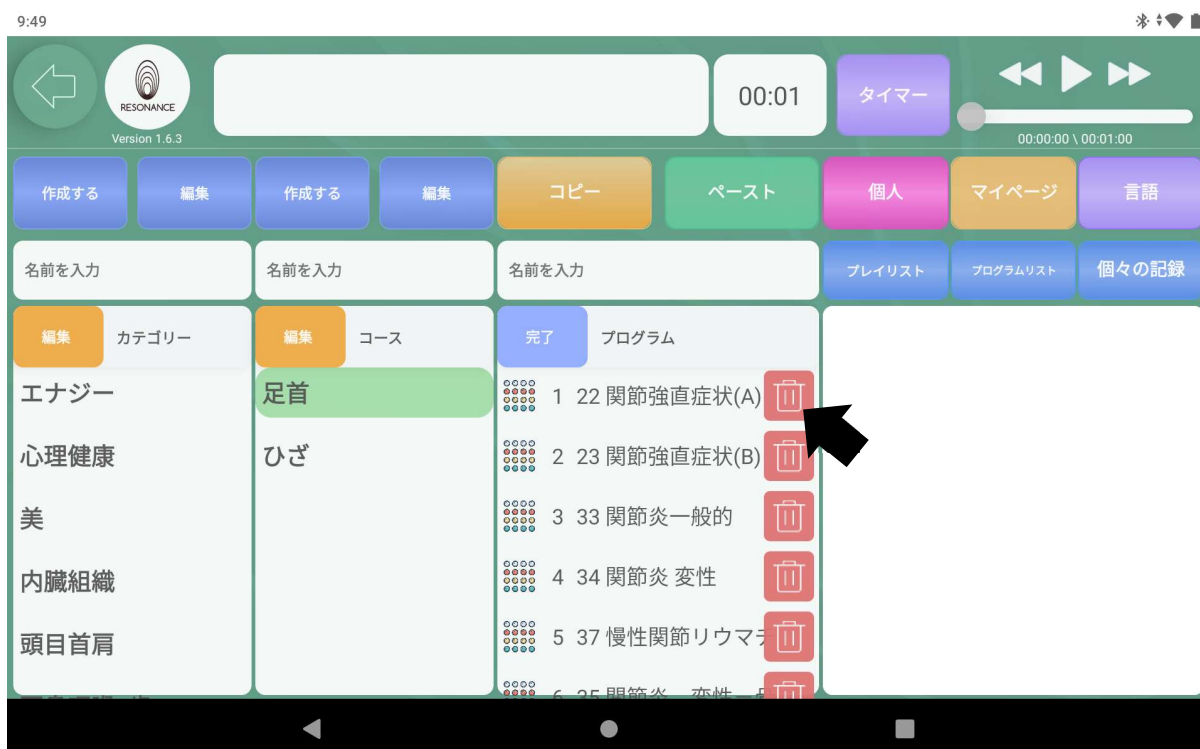

3-3. 【消去してもよろしいですか ○○】と表示されますので、【はい】をタッチします。



3-4. 終了したら【プログラム】の左隣の青い【完了】をタッチします。





## ④プログラムの順番を変更する


4-1. 【プログラム】左隣の黄色の【編集】をタッチします。



4-2. プログラム内の表示が変わります。



4-3. 左端の【。。。】の部分に指で触れたまま目的の位置まで移動させます。

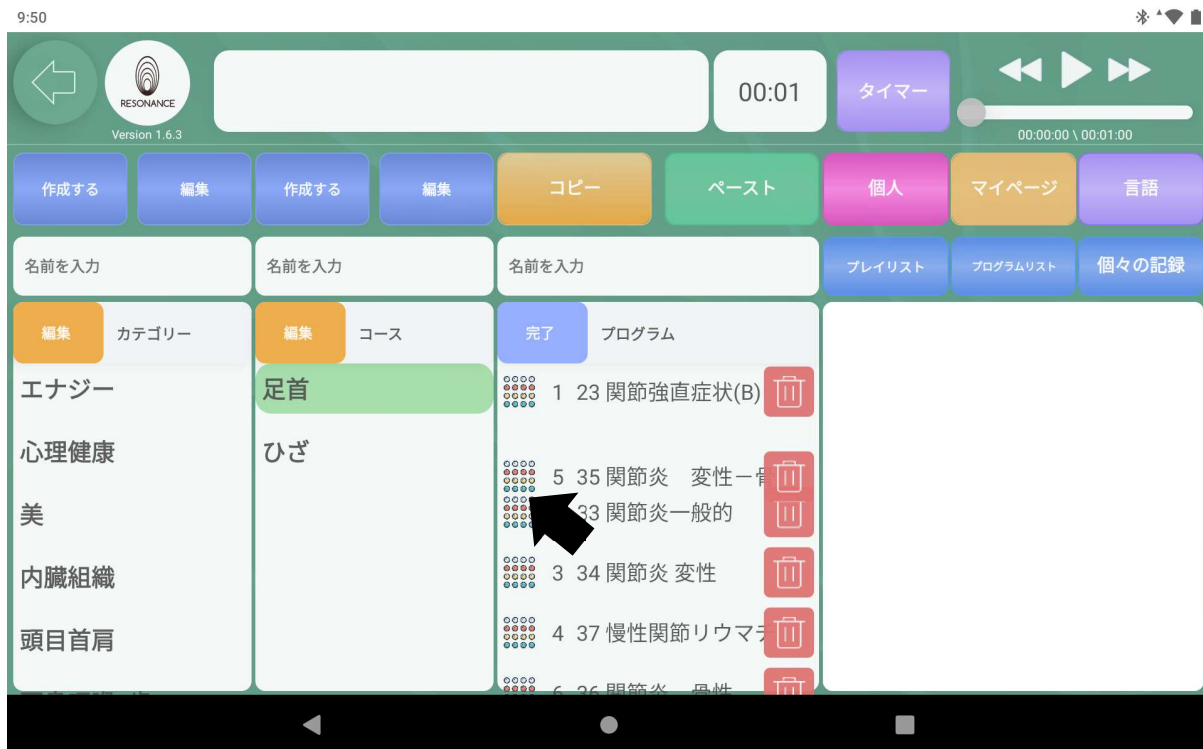

4-4. 終了したら【プログラム】の左隣の青い【完了】をタッチします。



## プレイリストの操作方法

P38【応用編】と同じ要領で自分専用のコースを作成することができます。  
また、作成したカテゴリー内のコースの連続再生も可能です。

### I. 自分専用の【※プレイリスト】を作成・編集・削除する

※カテゴリーに該当します

#### ①自分専用のプレイリストを作成する

例：「エネルギー系」と「内蔵デトックス」というプレイリストを作成します。

1-1. 画面右上にある青色の【プレイリスト】をタッチします。



1-2. 空欄のプレイリストの画面が表示されます。

画面左上にある【名前を入力】をタッチして、キーボードで名称を入力します。

詳細はP39 〈①自分専用のカテゴリーを作成する〉を参照。



1-3. 2つのプレイリストが作成されました。



※プレイリストは幾つでも作成できます。

## ②作成したプレイリストの名称を変更する

詳細はP40「②作成したカテゴリーの名称を変更する」を参照。

## ③作成したプレイリストを削除する

詳細はP43「③作成したカテゴリーを削除する」を参照。

## ④作成したプレイリストの順番を変更する

詳細はP45「④作成したカテゴリーの順番を変更する」を参照。

## Ⅱ. 自分専用の【コース】を作成・編集・削除

### ①自分専用のコースを作成する

例：「エーテル体とオーラ」、「チャクラ7」、「経絡20」というコースを作成します。

- 1-1. どのプレイリストにコースを作成するかを選択し、  
【コース】の上にある【名前を入力】をタッチします。  
キーボードで名称を入力します。

詳細はP47〈①自分専用のコースを作成する〉を参照。



1-2. 3つのコースが作成されました。



※コースは幾つでも作成できます。

## ②作成したコースの名称を変更する

詳細はP49「②作成したコースの名称を変更する」を参照。

## ③作成したコースを削除する

詳細はP52「③作成したコースを削除する」を参照。

## ④作成したコースの順番を変更する

詳細はP54「④作成したコースの順番を変更する」を参照。

### Ⅲ. 自分専用の【プログラム】を追加・編集・削除

#### ① 「プログラムリスト」からプログラムを追加する

例：「オーラ 歪み」というプログラムを追加します。

1-1. 追加したいコース名をタッチします。

1-2. 右側にある【プログラムリスト】の下の空欄【探す】をタッチして、キーボードでお好みのプログラム名もしくはキーワードを入力します。



※下にスクロールしてお好みのプログラムを探すこともできます。



1-3. 検索したプログラムが右側に表示されますので、追加したいプログラムをタッチします。



1-4. 画面に浮かび上がったプログラムを移動（タッチしたままプログラムの箱まで移動させます）させます。




1-5. プログラム内にプログラムがコピーされ表示されました。



## ②既存プログラムを「まとめてコピー」してオリジナルコースに追加する

2-1. 画面左上の【戻る】をタッチしてプロメニューに戻ります。

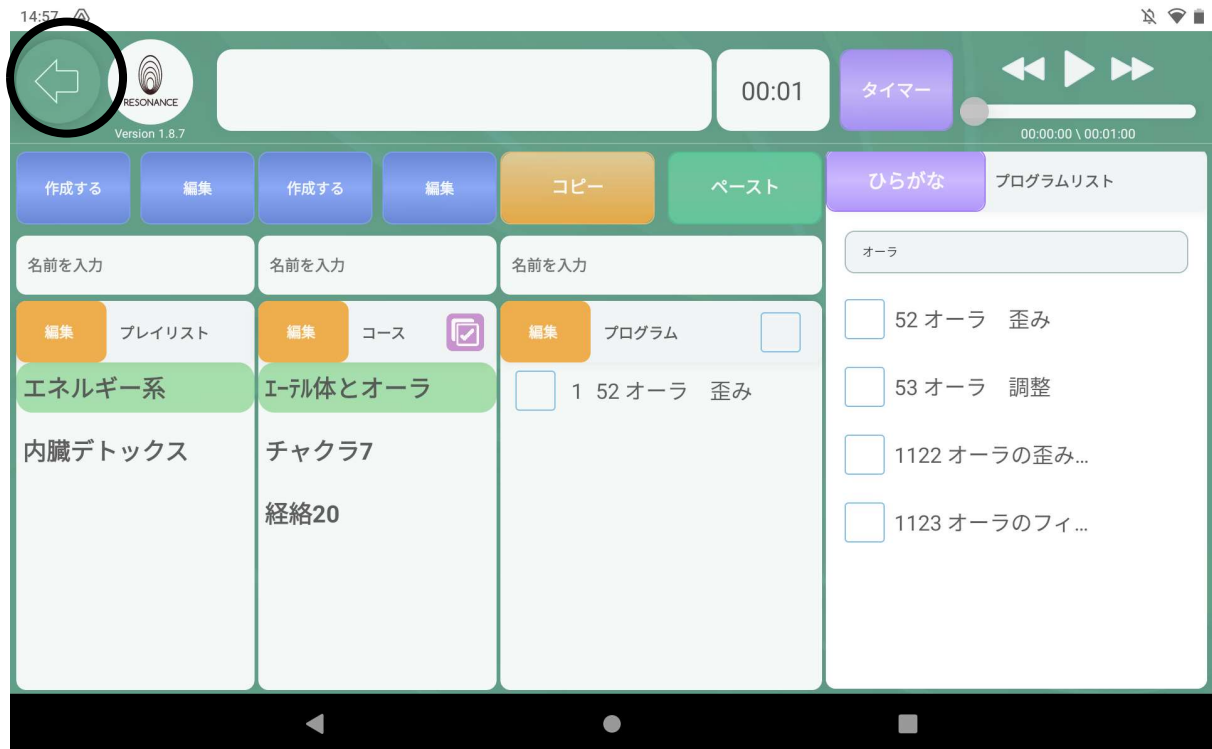

2-2. まとめてコピーしたい「カテゴリー」、「コース」を選びます。



2-3. プログラムが表示されたら、画面中央上の黄色い【コピー】をタッチします。


2-4. 続いて画面右上にある青色の【プレイリスト】をタッチします。



2-5. 【プレイリスト】の画面に戻り、貼り付けたい先の「プレイリスト」、「コース」を選択してタッチします。



2-6. 画面中央上の緑色の【ペースト】をタッチします。

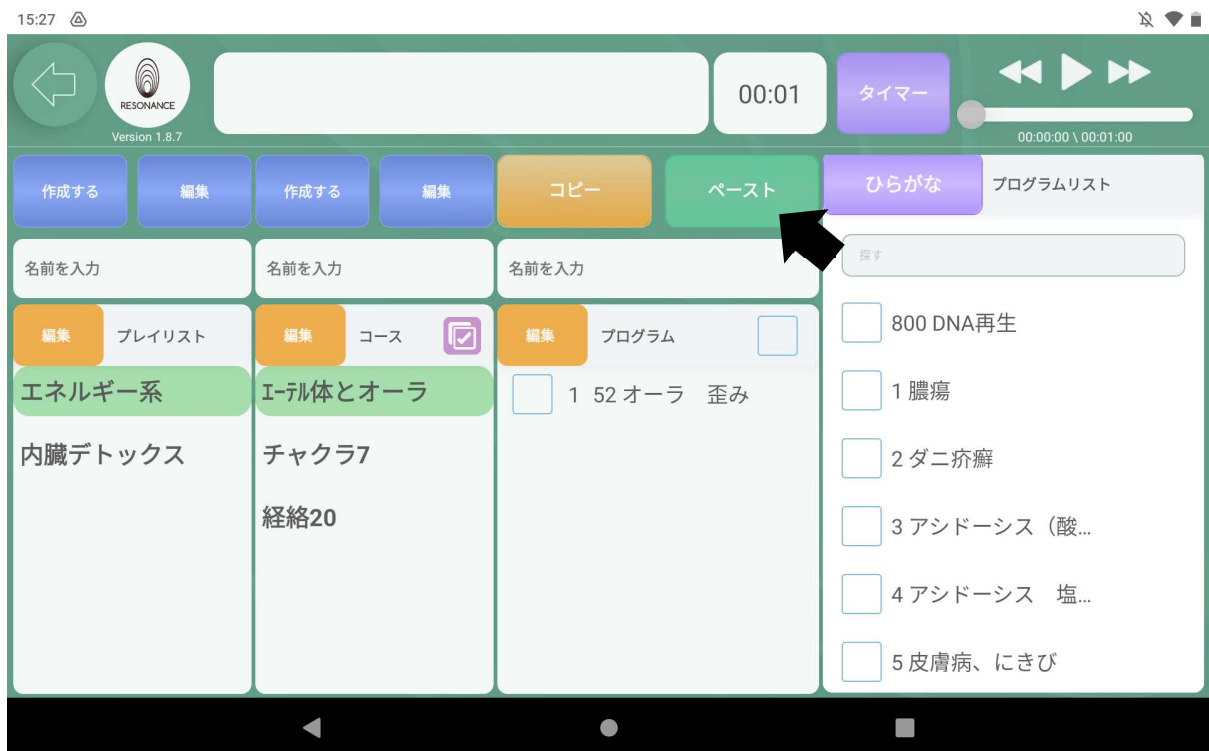

2-7. コピーしたプログラムが表示されました。



2-8. 同じ要領で【チャクラ7】と【経絡20】のオリジナルコースにも既存のプログラムをまとめてコピーして貼り付けました。



### ③プログラムを削除する

詳細はP62「③プログラムを削除する」を参照。

### ④プログラムの順番を変更する

詳細はP64「④プログラムの順番を変更する」を参照。

## IV. 作成したオリジナルコースを連続再生する

### ①全てのコースのプログラムを5つずつチェックする

※選択したプレイリスト内のコースに限ります。

1-1. 連続再生したい【プレイリスト】と一番上の【コース】をタッチします。

1-2. 画面中央左の紫色の☑のマークをタッチします。

※連続再生モードのボタンになります。






1-3. 連続再生のモードになると、選択したプレイリスト内の全てのコースが赤色になります。

画面中央の【プログラム】の右にチェックが入り、上から5つのプログラムの左の【】にチェックが入り水色になります。


画面左上の【】にチェックされたプログラム名が表示されます。

時間の設定をされていた場合は、画面上部にある時間の表示が【00:01】にリセットされます。

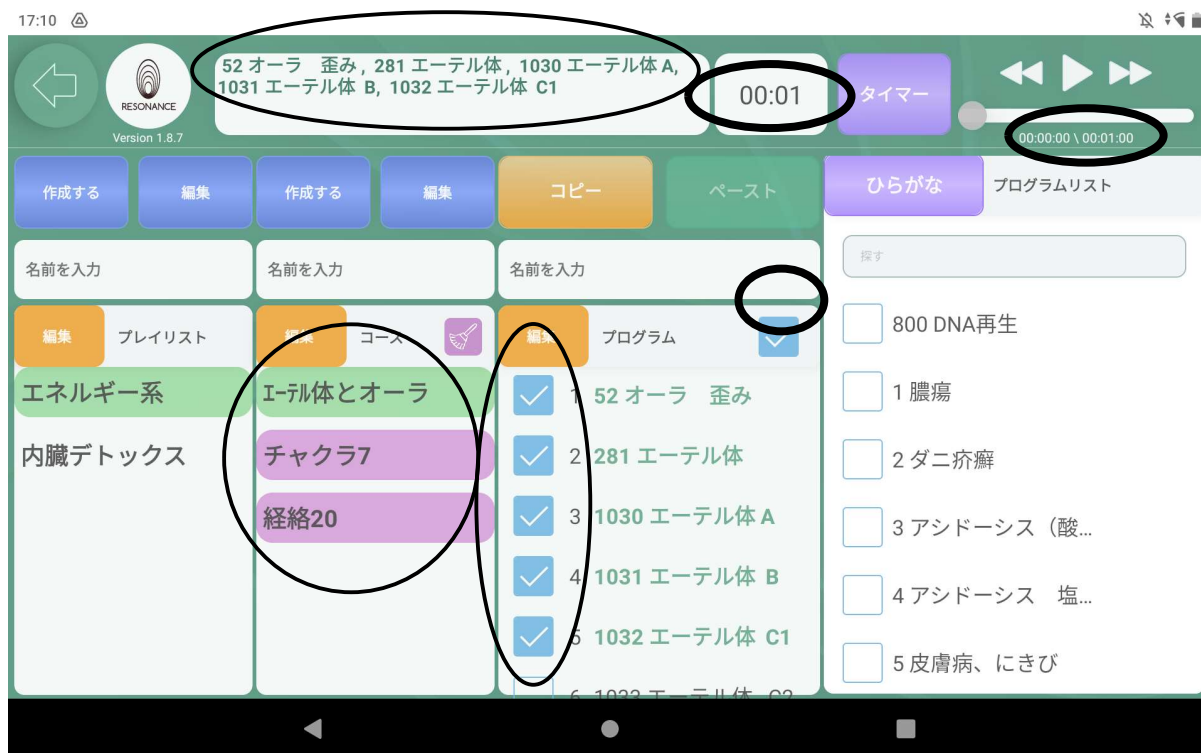

1-4. 他の全てのコースのプログラムにも、画面中央の【プログラム】の右にチェックが入り、上から5つのプログラムの左の【□】にチェックが入り水色になります。

画面左上の【□】にチェックされたプログラム名が表示されます。

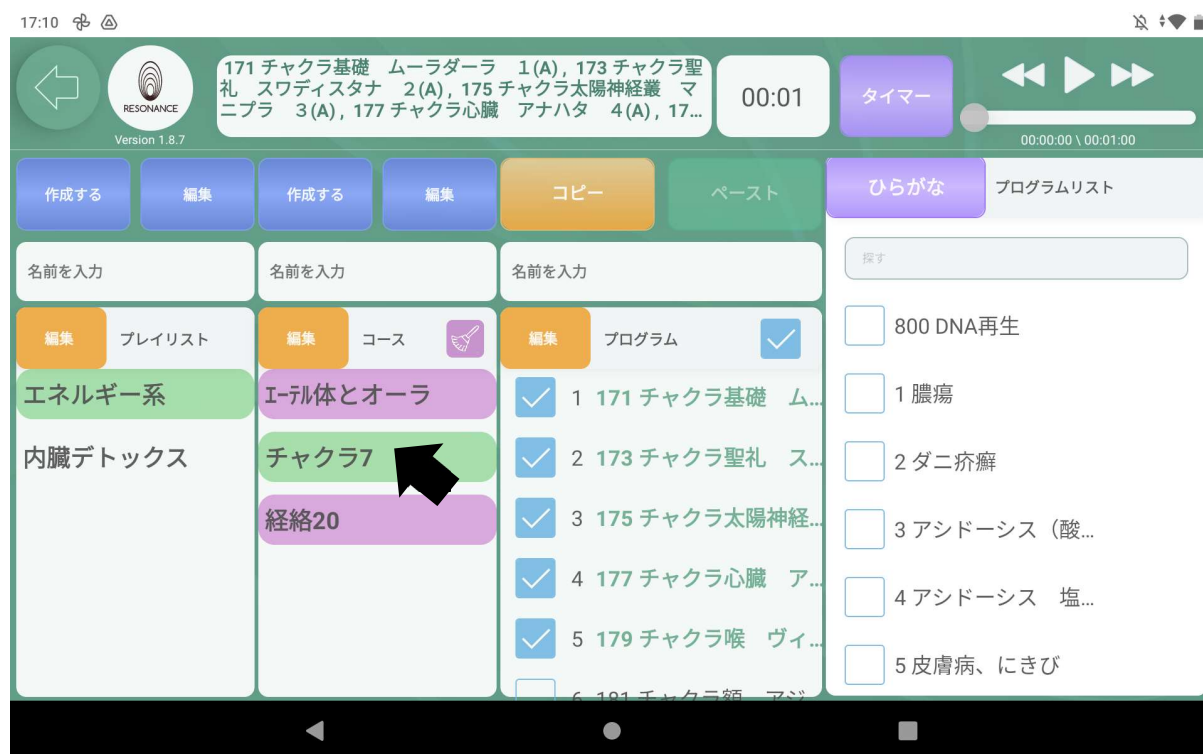

※「経絡20」も同様です。

## ②連続再生する全てのコースを同じ時間に設定する

※選択した【プレイリスト】内のコースに限ります。

例：全て10分に設定します。


2-1. 画面上部にある紫色のタイマーの隣の空白の部分タッチします。



2-2. キーボードでお好みの分数を入力し、紫色のタイマーを長押しします。



2-3. 【全てのコースの時間を設定してもよろしいですか?】と表示されますので、【OK】をタッチします。

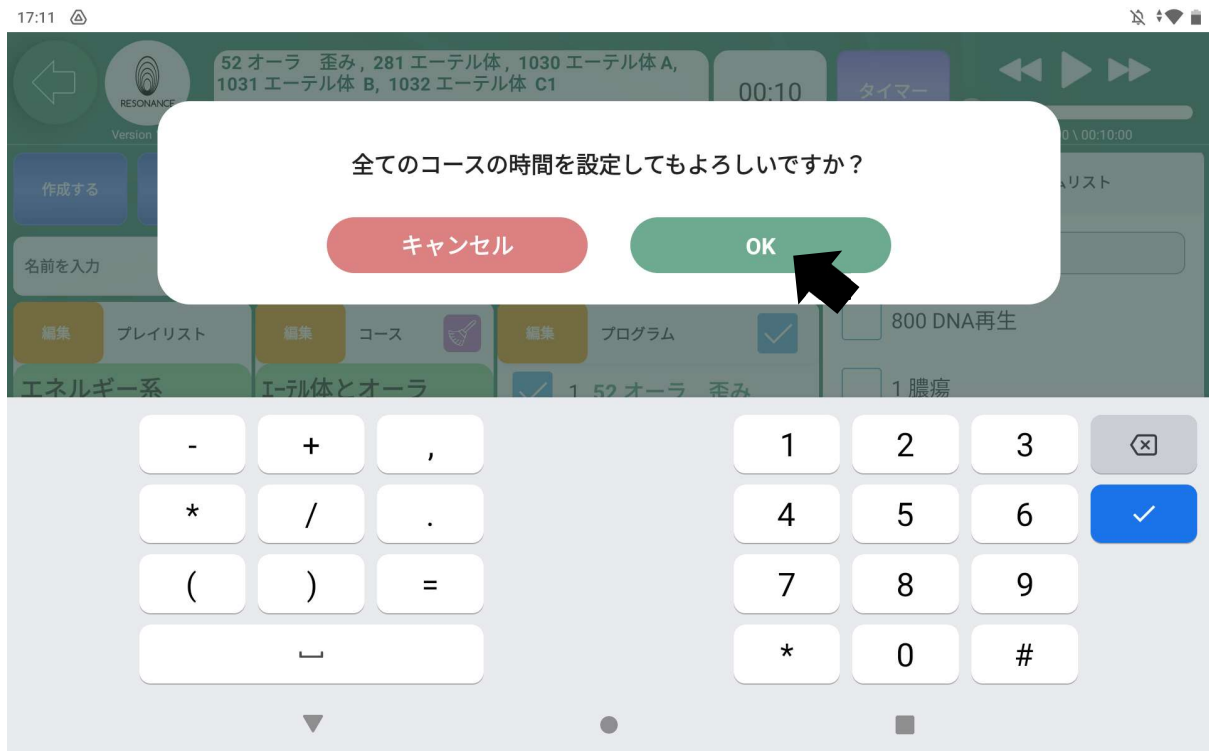

2-4. 全てのコースの紫色のタイマーの右隣りにある時間表示が設定した時間になります。



2-5. 他の全てのコースにも設定した時間が反映されています。



※「経絡20」も同様です。

※コース毎に時間を設定して連続再生することもできます。

詳細はP4「1-7. 時間の設定をする」を参照。

### ③作成したオリジナルコースを連続再生する

例：「エーテル体とオーラ」⇒「チャクラ7」⇒「経絡20」の順に連続再生します。

3-1. 一番上のコースをタッチして、画面右上にある【▶】をタッチすると、全てのコースのプログラムが1コースずつ自動的に最後まで連続再生されます。



※どのコースからでも連続再生することができます。

※同じコース内で他の5つのプログラムに変更したり、1～4つのプログラムに減らしても連続再生することができます。

※【プログラム】の右側にある水色のチェックをタッチするとそのコースだけ連続再生のモードを解除することができます。

例：連続再生モードから「チャクラ7」のコースだけを解除すると、「エーテル体とオーラ」⇒「経絡20」の順で連続再生されます。



### 4-3. 連続再生モードが解除されました。

